

PRO6136 · pH kompozitna elektroda brez dolivanja

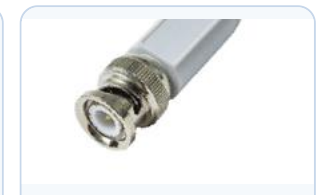
Telo iz polikarbonata · referenčni sistem Ag/AgCl · diafragma POM · se ne dopolnjuje · BNC

PH 0–14 5–60 °C BREZ DOPOLNJEVANJA DIAFRAGMA POM $\Phi 12 \times 120$ MM BNC (Q9)



PRO6136 je najpreprostejša elektroda v ponudbi: zaprta pH elektroda, ki se ne dopolnjuje, s telesom iz polikarbonata, za rutinske preglede razredčenih vodnih vzorcev in pitne vode.

Kako je zgrajena

 PH SENZOR Kroglasta konica Steklena membrana za splošno uporabo, za običajne raztopine.	 TELO Polikarbonat Nelomljivo telo za vsakdanje delo. Ni za organska topila.	 DIAFRAGMA POM Diafragma, odporna proti topilom, za elektrode, ki se ne dopolnjujejo.	 KONEKTOR BNC (Q9) Za pH instrumente z vhodom BNC za elektrodo.
OBMOČJE pH 0 – 14	TEMPERATURA 5 – 60 °C	VZDRŽEVANJE Brez dopolnjevanja	NAJBOLJŠA ZA Rutinske preglede

Zakaj jo izbrati

Preizkušen referenčni sistem: referenčni sistem Ag/AgCl za rutinske laboratorijske meritve.

Ničesar ni treba dopoljevati: zaprt referenčni sistem — sperite, shranite vlažno, merite.

Diafragma POM: diafragma, odporna proti topilom, za elektrode, ki se ne dopolnjujejo.

PRO6136 · pH kompozitna elektroda brez dolivanja

PRO6136 — STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO

Tehnični parametri

Parameter	Specifikacija
Model / šifra za naročilo	PRO6136
Vrsta elektrode	pH kompozitna (kombinirana) elektroda
Merilno območje	pH 0 – 14
Delovna temperatura	5 – 60 °C
pH senzor	Polkroglasta steklena membrana
Material telesa	Polikarbonat
Referenčni sistem	Ag/AgCl
Diafragma	POM
Raztopina za dopolnjevanje	Se ne dopolnjuje — brez dolivanja elektrolita
Temperaturni senzor	Ni vgrajen
Dimenzije	Φ12 × 120 mm
Konektor	BNC (Q9)

Kompenzacija temperature: elektroda nima vgrajenega temperaturnega senzorja; uporabi se ločena temperaturna sonda instrumenta ali ročna kompenzacija.



Konektor BNC (Q9). Priključi se neposredno na pH instrumente z vhodom BNC za elektrodo.

Priporočeni vzorci

Področje	Vrste vzorcev • priporočeno
Vodne raztopine	Razredčene kisline in baze
Okolje	Voda iz pipe in pitna voda (približno 100 µS/cm)
Uporabna tudi ○	Raztopine za fiksiranje in galvanizacijo • jogurt, sir, maslo • marmelada • jedilna olja • sojina omaka, kis • barve, barvila, črnilo • barve na vodni osnovi, laki, premazi, lateks • apreturna sredstva • gel, milo, šampon, barva za lase, losjon • izcedne vode iz tal • blato <i>Življenjska doba je lahko krajša.</i>

Podatki za naročilo

Šifra: PRO6136

Konektor: BNC (Q9) — pred naročilom preverite vhod na instrumentu.

Potrošni material: raztopina za dopolnjevanje ni potrebna.

Drugo elektrodo izberite, kadar gre za

Čisto vodo ali vodo z nizko prevodnostjo: elektroda za nizko prevodnost ali za ultračisto vodo.

Organska topila: elektroda s steklenim telesom.

Nad 60 °C: elektroda, predvidena za višjo temperaturo.

PRODAJA IN PODPORA

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenija

HITRI KONTAKT

 colo.si/sl

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • POMOČ PRI IZBIRI ELEKTRODE

Niste prepričani, da je to prava elektroda za vaš vzorec?

Pošljite nam model instrumenta, vrsto vzorca, območje pH in temperaturo — elektrodo bomo potrdili ali predlagali boljšo izbiro iz kataloga.

Tehnične vrednosti so namenjene izbiri izdelka. Za dobavo je zavezujoča konfiguracija, potrjena v ponudbi COLO.Science.

PRO6136 — STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO