

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

CENS-TP serija laboratorijskih preciznih vaga sa ekranom osetljivim na dodir

Miligramska vaga | kapacitet 1000-6000 g | čitljivost 0,01 g | ekran osetljiv na dodir | laboratorijska precizna vaga

CENS-TP precizne vage su laboratorijske precizne vage sa ekranom osetljivim na dodir i čitljivošću 0,01 g, namenjene rutinskom merenju, pripremi uzoraka, brojanju komada, procentualnom merenju i kontrolnom merenju. Serija pokriva kapacitete od 1000 g do 6000 g, sa RS232/USB komunikacijom, tarom po celom opsegu i opcionim radom na punjivi akumulator.

1000-6000 G

ČITLJIVOST 0,01 G

EKRAN OSETLJIV NA DODIR

BROJANJE KOMADA

KONTROLNO MERENJE

RS232 / USB

OPCIONI AKUMULATOR

OPCIONI ŠTAMPAČ

Tip dokumenta: list tehničke specifikacije


Familija proizvoda: **CENS-TP serija laboratorijskih preciznih vaga sa ekranom osetljivim na dodir**

Kapacitet: **1000 / 2000 / 3000 / 5000 / 6000 g**

Kalibracija / kontrola: **eksterna kalibracija ili kontrola opcionim setom tegova**

Karakteristika serije: **laboratorijsko merenje sa čitljivošću 0,01 g preko ekrana osetljivog na dodir, sa režimima brojanja komada, kontrolnog merenja i menija za štampu**

Format: **A4 pejžaj | COLO.Science TechSpec v2.5**

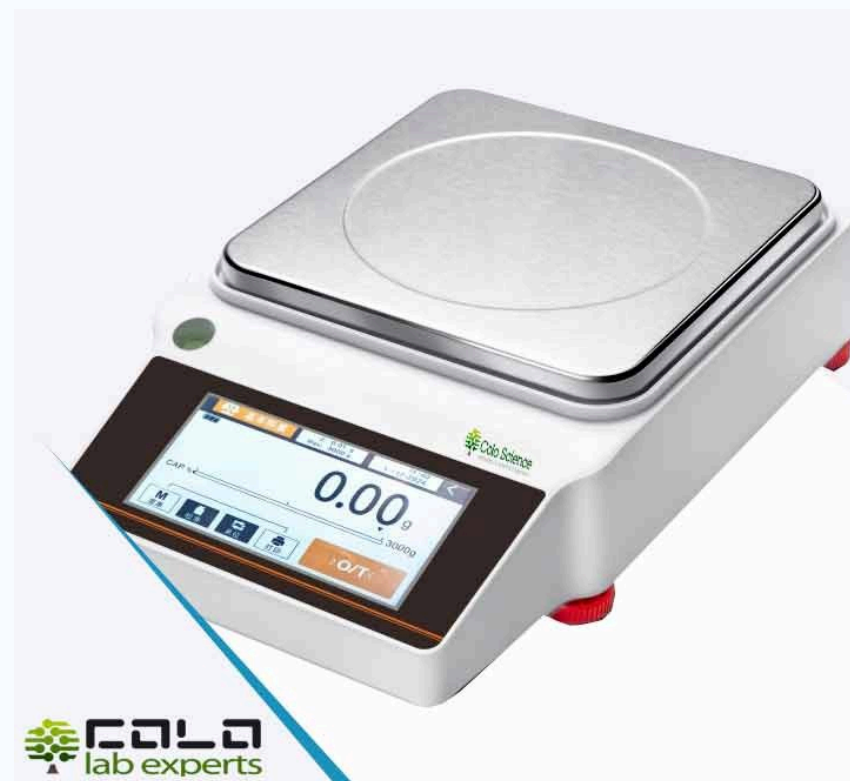

CENS-TP precizna vaga | ekran osetljiv na dodir | stakleni vetrobran | čitljivost 0,01 g

MERNI OPSEG

1000-6000 g
d = 0,01 g

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića
1
21000 Novi Sad,
Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

CENS-TP | serija laboratorijskih preciznih vaga sa ekranom osetljivim na dodir

Čitljivost 0,01 g, rukovanje preko ekrana osetljivog na dodir i merenje mernom ćelijom visoke tačnosti

MAKS. 6000 G

D = 0,01 G

STAKLENI VETROBRAN

RS232 / USB IZLAZ

Modeli velikog kapaciteta sa 0,01 g, ekranom osetljivim na dodir, brojanjem komada i kontrolnim merenjem

Pregled serije

Precizno merenje uz ekran osetljiv na dodir

Čitljivost 0,01 g: za rutinsko laboratorijsko merenje, pripremu uzoraka, izradu receptura i zadatke kontrole kvaliteta.

Širok opseg kapaciteta: izaberite 1000 g, 2000 g, 3000 g, 5000 g ili 6000 g prema potrebnom radnom opterećenju.

Merna ćelija visoke tačnosti: stabilne performanse rutinskog merenja za opštu laboratorijsku upotrebu.

Tara po celom opsegu: udoban rad sa posudama, podlošcima, lađicama za merenje i držačima uzoraka.

Rad preko ekrana osetljivog na dodir

Osnovno merenje: direktan režim rutinskog merenja za svakodnevni laboratorijski rad.

Režim brojanja komada: brojanje sitnih komponenti nakon podešavanja referentne vrednosti.

Kontrolno merenje: merenje u odnosu na zadate granice za provere tipa ispravno/neispravno i QC procedure.

Meni za štampu: podešavanja komunikacije na ekranu za izlaz na štampač ili računar.

Rad sa podacima i opcije napajanja

Interfejs: RS232 i USB za štampač, povezivanje sa računarom ili prikupljanje podataka.

Opcioni štampač: direktna štampa zapisa merenja za laboratorijsku dokumentaciju.

Opcioni akumulator: rad na punjivu bateriju dostupan je kada je potrebno merenje bez mrežnog napajanja.

Opcioni kalibracioni tegovi: set tegova od 1 mg do 2 kg za kalibraciju i rutinske kontrolne provere.

Ključni tehnički podaci

Nazivi u CRM-u: CENS-TP 1000g/0.01g, 2000g/0.01g, 3000g/0.01g, 5000g/0.01g i 6000g/0.01g Precision Balance Touch Screen (izvorni nazivi zapisa).

Ponovljivost: $\pm 0,02$ g za celu seriju.

Linearnost: $\pm 0,03$ g za celu seriju.

Veličina tase: 170 x 170 mm.

Ukupne dimenzije: 280 x 190 x 90 mm.

MODEL I

1000-6000 g

ČITLJIVOST

0,01 g

UPRAVLJANJE

Ekran osetljiv na dodir

INTERFEJS

RS232 / USB

Izbor modela i tehnička specifikacija

Tabela modela laboratorijskih preciznih vaga sa ekranom osetljivim na dodir

Naziv u CRM-u	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Displej / upravljanje	Izlazni interfejs
CENS-TP 1000g/0.01g Precision Balance Touch Screen	CENS-TP 1000g/0.01g	1000 g	0,01 g	±0,02 g	±0,03 g	ekran osetljiv na dodir	RS232 / USB
CENS-TP 2000g/0.01g Precision Balance Touch Screen	CENS-TP 2000g/0.01g	2000 g	0,01 g	±0,02 g	±0,03 g	ekran osetljiv na dodir	RS232 / USB
CENS-TP 3000g/0.01g Precision Balance Touch Screen	CENS-TP 3000g/0.01g	3000 g	0,01 g	±0,02 g	±0,03 g	ekran osetljiv na dodir	RS232 / USB
CENS-TP 5000g/0.01g Precision Balance Touch Screen	CENS-TP 5000g/0.01g	5000 g	0,01 g	±0,02 g	±0,03 g	ekran osetljiv na dodir	RS232 / USB
CENS-TP 6000g/0.01g Precision Balance Touch Screen	CENS-TP 6000g/0.01g	6000 g	0,01 g	±0,02 g	±0,03 g	ekran osetljiv na dodir	RS232 / USB

Merni sistem i performanse


Parametar	Specifikacija
Kapaciteti modela	1000 / 2000 / 3000 / 5000 / 6000 g
Čitljivost	0,01 g
Ponovljivost	±0,02 g
Linearnost	±0,03 g
Merna ćelija	merna ćelija visoke tačnosti
Opseg tare	ceo opseg
Opciono napajanje	opcija punjivog akumulatora / baterije

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Displej / upravljanje	ekran osetljiv na dodir
Režimi merenja	osnovno merenje, brojanje komada, procentualno merenje, kontrolno merenje, merenje životinja, podešavanja komunikacije, proporcionalno doziranje
Jedinice	g, kg, lb, oz, ozt, dwt, ct, gn, tola, gsm
Veličina tasa	170 x 170 mm
Interfejs	RS232 / USB
Napajanje	ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	280 x 190 x 90 mm
Neto / bruto masa	2,5 kg / 4 kg
Dimenzije pakovanja	34 x 25 x 16 cm

Napomena o izvoru: Podaci za CENS-TP preneti su iz dostavljene CRM liste, snimaka ekrana sa specifikacijama i dostavljenih linkova ka slikama proizvoda i pribora. Ovaj list prati postojeći COLO raspored tehničke specifikacije u formatu A4 pejzaž; ova verzija je na srpskom jeziku.

Primene, režimi na ekranu osetljivom na dodir i opcioni pribor

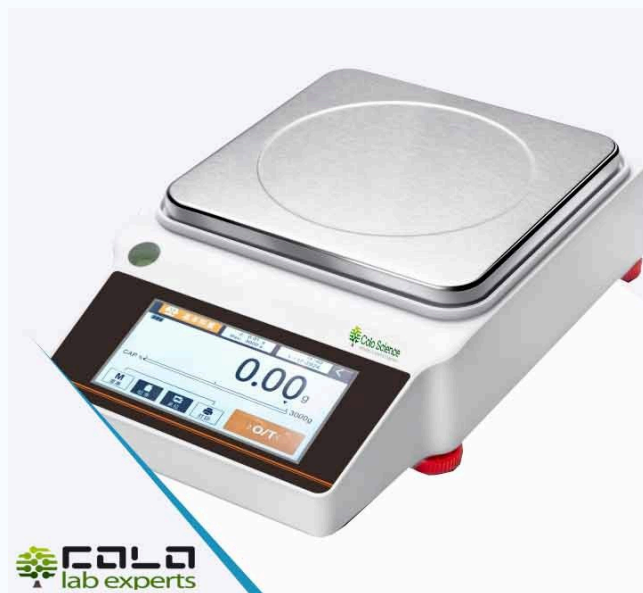

CENS-TP precizna vaga | laboratorijska merna platforma sa ekranom osetljivim na dodir

Kalibracioni i kontrolni teg

Preporučeni pribor

Set kalibracionih/kontrolnih tegova:

opcioni set od 1 mg do 2 kg za eksternu kalibraciju i rutinsku verifikaciju.

Izbor: nominalne vrednosti izaberite prema izabranom kapacitetu i laboratorijskom SOP-u.



Opcioni set kalibracionih i kontrolnih tegova, od 1 mg do 2 kg

Napomena o poručivanju: rad na punjivi akumulator/bateriju, štampač, komunikacioni kabl i set kalibracionih/kontrolnih tegova treba potvrditi prema izabranom CENS-TP modelu i laboratorijskoj proceduri dokumentovanja.

Tipične laboratorijske primene

Osnovno merenje: rutinsko merenje hemikalija, praškova, tečnosti, uzoraka i posuda.


Režim brojanja komada: brojanje sitnih delova nakon utvrđivanja referentne količine i prosečne mase komada.

Kontrolno merenje: kontrola gornje/donje granice za QC provere, porcionisanje i ponovljena merenja.


Procentualno merenje: poređenje uzoraka i proporcionalno doziranje.

Meni za štampu: podešavanja komunikacije za izlaz na opcioni štampač ili računar.


Ekрани režima rada i opcioni pribor

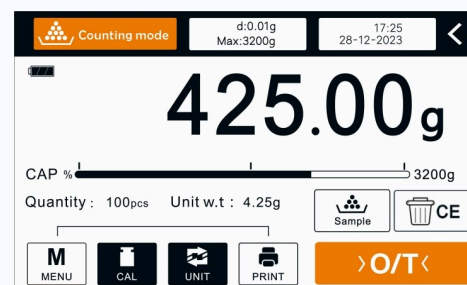

Režim brojanja komada na ekranu osetljivom na dodir

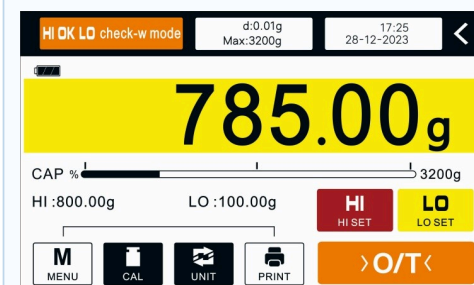

Režim kontrolnog merenja za kontrolu zadatih granica

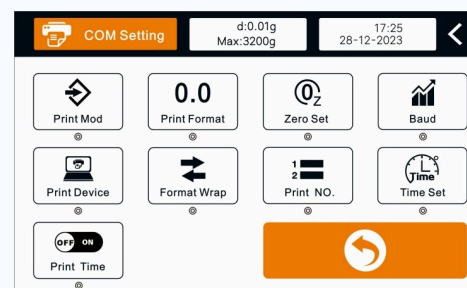

Meni za štampu – podešavanja komunikacije sa štampačem ili računarom



Opcioni štampač za zapise merenja

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: pošaljite predviđeni kapacitet, ciljnu masu uzorka, način brojanja komada/kontrolnog merenja, potrebu za štampom, zahtev za akumulator i proceduru sa kalibracionim tegovima.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Serijska:** CENS-TP miligramska vaga velikog kapaciteta

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA CENS-TP PRECIZNE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfiguraciji CENS-TP miligramske vage velikog kapaciteta?

Pošaljite izabrani kapacitet, način merenja, zahteve za brojanje komada i kontrolno merenje, zahtev za štampu/izlaz podataka i očekivanja u pogledu dokumentacije. COLO.Science će potvrditi CENS-TP model, opcionu štampač i set kalibracionih tegova od 0,01 g do 1 kg.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga

Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage

Precizne vage

Analitičke vage

Kalibracioni tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatraži ponudu

Kontaktirajte COLO.Science tim