Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PDF TEGOVI SA PROREZOM | STRANICA PROIZVODA | ZATRAŽITE PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | KALIBRACIONI TEGOVI M1

Set tegova sa prorezom M1

Kalibracioni tegovi sa prorezom 100 g - 10 kg | Nosač 200 g | OIML R111-1 klasa M1 | Nerđajući čelik

COLO set tegova sa prorezom sadrži sedam tegova sa prorezom od 100 g do 10 kg i nosač od 200 g. Tegovi se kroz prorez navlače na šipku nosača i slažu centrično, pa se na jednom nosaču dobija tačno određeno opterećenje od 200 g do 19 kg. Set je namenjen kalibraciji i ispitivanju opterećenjem ispitne i merne opreme, dinamometara, opružnih i visećih vaga i ispitnih stolova.

KLASA M1 | OIML R111-1 | 100 G - 10 KG | NOSAČ 200 G | UKUPNO 19 KG | NERĐAJUĆI ČELIK | PROREZ 8,5 MM | SERTIFIKAT PO IZBORU

Tip dokumenta: **list tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **kalibracioni tegovi | tegovi sa prorezom**
Sadržaj seta: **100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg + nosač 200 g**
Klasa tačnosti: **M1 prema OIML R111-1**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.4**



Tegovi sa prorezom klase M1 | nerđajući čelik | nosač sa kukom

OPSEG OPTEREĆENJA
200 g - 19 kg
na jednom nosaču

ADRESA
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

Set tegova sa prorezom | klasa M1

Opterećenje od 200 g do 19 kg na jednom nosaču

OIML R111-1 M1 | 7 TEGOVA + NOSAČ | NERĐAJUĆI ČELIK | CENTRIČNO SLAGANJE **Za kalibraciju i ispitivanje opterećenjem ispitne i merne opreme**

Pregled seta

Primena

Ispitivanje sile i zatezanja: kalibracija i provera dinamometara, merača sile zatezanja i opružnih vaga.

Ispitni stolovi: tačno određeno opterećenje tegovima za ispitne uređaje i pribore.

Viseće i kranske vage: provera opterećenja korak po korak sa nosačem.

T&E oprema: redovne provere opterećenja u okviru sistema kvaliteta.

Izvedba i rukovanje

Izvedba sa prorezom: prorez 8,5 mm sa centralnim otvorom Ø 12 mm na svakom tegu.

Centrično slaganje: tegovi se navlače na šipku nosača i leže centrično jedan na drugom.

Nosač tegova 200 g: šipka sa kukom i osnovnom pločom; masa nosača je deo opterećenja.

Nerđajući čelik: obrađene površine, svaki teg sa komorom za justiranje.

Glavne karakteristike

Klasa tačnosti: M1 prema OIML R111-1.

Sadržaj seta: 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg i 10 kg, po 1 kom.

Nosač: 200 g, predviđen za sve tegove iz seta.

Ukupno opterećenje: do 19 kg sa svim tegovima i nosačem.

Ispitne tačke: tegovi od 100 g do 10 kg kombinuju se na nosaču za potrebne korake opterećenja.

Sertifikat: sertifikat o kalibraciji za set kao opcija.

Osnovni tehnički podaci

Parametar	Specifikacija
Klasa tačnosti	M1, OIML R111-1
Nominalne vrednosti	100 g / 200 g / 500 g / 1 / 2 / 5 / 10 kg
Nosač tegova	200 g
Najveće ukupno opterećenje	19 kg (svi tegovi + nosač)
Materijal	Nerđajući čelik
Prorez / centralni otvor	8,5 mm / Ø 12 mm
Sertifikat	Sertifikat o kalibraciji (po izboru)

TEGOVI	OPSEG	UKUPNO OPTEREĆENJE	KLASA
7 + nosač	**100 g - 10 kg**	**19 kg**	**M1 (OIML R111-1)**

Tegovi i tehničke specifikacije

Tegovi u setu


Nominalna vrednost	Prečnik D (mm)	Visina H (mm)	Prorez / centralni otvor	Najveća dozvoljena greška, klasa M1
100 g	45	9,7	8,5 mm / Ø 12 mm	± 5 mg
200 g	60	10,4	8,5 mm / Ø 12 mm	± 10 mg
500 g	80	14,1	8,5 mm / Ø 12 mm	± 25 mg
1 kg	100	17,6	8,5 mm / Ø 12 mm	± 50 mg
2 kg	100	34,8	8,5 mm / Ø 12 mm	± 100 mg
5 kg	–	54,7	8,5 mm / Ø 12 mm	± 250 mg
10 kg	185 (stepenik za centriranje Ø 145)	56,8	8,5 mm / Ø 12 mm	± 500 mg
Nosač 200 g	Šipka sa kukom i osnovnom pločom, nosi sve tegove iz seta			–

Materijal i izvedba

Parametar	Specifikacija
Materijal	Nerđajući čelik
Oblik	Cilindrični tegovi u obliku diska sa prorezom
Širina proreza	8,5 mm, sa centralnim otvorom Ø 12 mm
Justiranje	Komora za justiranje u svakom tegu
Teg 10 kg	Stepenik za centriranje Ø 145 mm sa donje strane
Referentni standard	OIML R111-1, klasa tačnosti M1


Mere su nominalne vrednosti. Najveće dozvoljene greške prema OIML R111-1 za klasu M1.

Šema

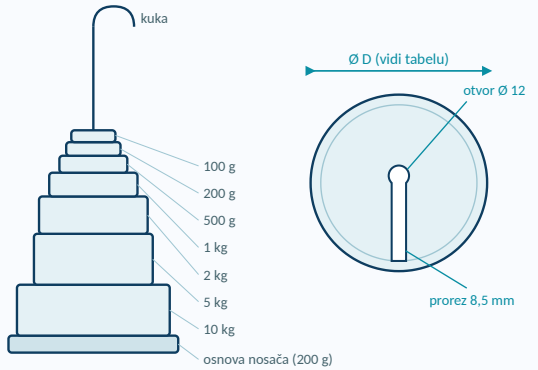

Bočni izgled – set složen na nosaču **Pogled odozgo – teg sa prorezom**

Obim isporuke, sertifikat i upotreba

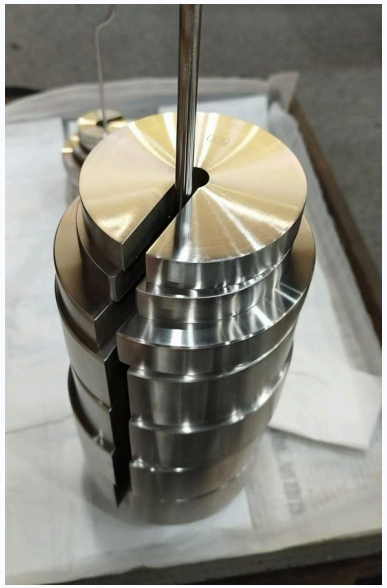

Tegovi sa prorezom složeni na nosaču | centrično opterećenje

Obim isporuke

Tegovi sa prorezom: 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg i 10 kg, po 1 kom.

Nosač tegova: 200 g, sa kukom.

Sertifikat o kalibraciji: po izboru, za sve tegove iz seta i nosač, klasa M1 prema OIML R111-1.

Slaganje opterećenja

Počnite od nosača: nosač od 200 g je uvek deo opterećenja.

Dodajte tegove: kombinujte tegove do potrebne ispitne tačke, npr. 1,2 kg = nosač + 1 kg.

Puno opterećenje: nosač + svih sedam tegova = 19 kg.

Napomena za porudžbinu: Navedite da li je potreban sertifikat o kalibraciji i koje ispitne tačke koristi vaša procedura. Pojedinačni tegovi sa prorezom, druge nominalne vrednosti i druge klase tačnosti na upit.

Napomene za rukovanje i upotrebu

Zadavanje opterećenja

Slobodno vešanje: pre očitavanja sačekajte da opterećeni nosač miruje.

Centrično slaganje: najveći tegovi dole, najmanji gore.

Održavanje

Čiste površine: tegove držite bez prašine, ulja i otisaka prstiju.

Pažljivo rukovanje: koristite rukavice i izbegavajte udarce i ogrebotine.

Ponovna kalibracija

Interval: interval ponovne kalibracije odredite u svom sistemu kvaliteta.

Sledivost: sertifikat čuvajte uz set.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: Pošaljite opremu koju proveravate, potrebne ispitne tačke i najveće opterećenje, klasu tačnosti i da li je potreban sertifikat o kalibraciji.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Set: tegovi sa prorezom M1, 100 g - 10 kg

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA KALIBRACIONE TEGOVE

Potrebni su vam tegovi sa prorezom za vašu proceduru?

Pošaljite vrstu opreme, ispitne tačke, najveće opterećenje i zahteve za dokumentaciju. COLO.Science potvrđuje odgovarajući set, pojedinačne tegove sa prorezom, klasu tačnosti i sertifikat o kalibraciji.

Otvorite PDF | Zatražite ponudu | Pregled vaga | Katalog vaga | Kalibracioni tegovi M1

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju niti kriterijume prijema utvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi ili potvrdi porudžbine. Za konkretnu porudžbinu potvrdite sadržaj seta, klasu tačnosti i sertifikat o kalibraciji. Specifikacije se mogu menjati bez najave.