

ZATRAŽITE PONUDU

ZNANJE O CENTRIFUGAMA

LACE32

Univerzalna stona laboratorijska centrifuga 6000 o/min

LACE32 je svestrana centrifuga male brzine za rutinsku pripremu uzoraka u kliničkim, istraživačkim i industrijskim laboratorijama. Širok izbor horizontalnih, ugaonih rotora i rotora za mikroploče podržava formate od mikroeproveta do posuda od 250 ml i mikroploča sa više bunara.

DO 6000 O/MIN

DO 6321 × G

DO 4 × 250 ML

EKRAN NA DODIR OD 5 INČA

10 NIVOVA RAMPE

POGON BEZ ČETKICA

Dokument: Tehnička specifikacija na srpskom jeziku

Proizvod: **LACE32** stona centrifuga

Porodica rotora: **9** kompatibilnih konfiguracija iz dostavljenog CSV-a

Format: **A4** horizontalno | 6 strana | COLO.Science TechSpec



LACE32 stona laboratorijska centrifuga | rotor se prodaje/konfiguriše prema porudžbini

BRZINA

6000 o/min maks.

SILA

6321 × g maks.*

KONTAKT

sales@colo.si

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽITE PONUDU

ZNANJE O CENTRIFUGAMA

Performanse, upravljanje i zaštita

Projektovana za ponovljivu rutinsku separaciju i fleksibilan izbor rotora

MAKSIMALNA BRZINA

6000 o/min

MAKSIMALNI RCF

6321 × g*

NAJVEĆI NAVEDENI ROTOR

4 × 250 ml

KONTROLA RAMPE

10 nivoa

Ključne karakteristike

Stabilna geometrija poklopca: trouglasta struktura fiksnog poklopca ravnomerno raspoređuje naprezanje za stabilnu rotaciju.

Višeslojna zaštita: elektronska brava poklopca, kućište od hladno valjanog čelika T45, potpuno čelični unutrašnji štiti i komora od nerđajućeg čelika.

Meko pokretanje i zaustavljanje: deset nivoa ubrzavanja/usporavanja pomaže u ograničavanju ponovnog mešanja nakon odvajanja.

Više režima rada: centrifugiranje sa tajmerom, kratkotrajno (jog), gradijentno i sa vremenskom razlikom.

Komora otporna na koroziju: jednodelna duboko vučena komora sa nano-keramičkim premazom.

Apsorpcija udara: trostepeno gumeno prigušenje, podrška automatskom uravnoteženju i zaustavljanje pri neuravnoteženosti.

Upravljanje dodirom: Precizni ekran osetljiv na dodir od 5 inča sa prikazom u realnom vremenu i izmenom parametara.

Tipične primene

Kliničke laboratorije: odvajanje uzoraka seruma, plazme, krvi i urina.

Postupci sa ćelijama: sakupljanje ćelija, ispiranje i bistrenje.

Biofarmaceutski rad: rutinska priprema uzoraka i odvajanje faza.

Radioimunološki test: izbor rotora za uobičajene formate epruveta za analize.

Istraživanje i QA/QC: opšte odvajanje tečnosti/suspenzija.

Priprema mikroploča: kompatibilna opcija rotora 2 × 2 × 96.

Princip izbora

Izaberite rotor prema **format epruveta ili ploča, dimenzije posuda, radna zapremina, potrebni RCF i maksimalna dozvoljena brzina za posudu.**

Radna ograničenja određuje najniže ograničenje među centrifugom, rotorom, čašicom, adapterom i posudom za uzorak.

* **Zavisno od rotora.** Maksimalne vrednosti od 6000 o/min / 6321 × g preuzete su iz dostavljenih podataka o proizvodu/dodatnoj opremi. Tačnu maksimalnu brzinu i RCF za izabrani rotor, čašicu i adapter proverite u potvrdi narudžbine.

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽITE PONUDU

Glavne tehničke specifikacije

Parametar	Specifikacija
Model	LACE32
Tip	Univerzalna stona centrifuga male brzine, bez hlađenja
Maksimalna brzina	Do 6000 o/min, zavisno od rotora
Maksimalni RCF	Do 6321 × g, zavisno od rotora
Maksimalni navedeni kapacitet	4 × 250 ml sa kompatibilnim horizontalnim rotorom
Ekran	Precizni ekran osetljiv na dodir od 5 inča
Prikazane / zadate vrednosti	Brzina, RCF, vreme i parametri rotora/metode
Tajmer	0–99 min; dodatni režimi rada prema konfiguraciji
Rukovanje o/min / RCF	Konverzija o/min–RCF prema izabranom rotoru

Parametar	Specifikacija
Pogon	Motor bez četkica koji ne zahteva održavanje
Ubrzavanje / usporavanje	10 podesivih nivoa; podrška za blagi start/zaustavljanje
Režimi rada	Vremenski podešeno, impulsno, gradijentno i diferencijalno vremensko centrifugiranje
Zaštita poklopca	Elektronska sigurnosna blokada; poklopac ostaje zaključan tokom rotacije
Zaštita od neuravnoteženosti	Automatska detekcija i zaustavljanje
Kućište / štit	Kućište od hladno valjanog čelika T45 sa potpuno čeličnim unutrašnjim štitom
Komora	Nerđajući čelik 304, izrađen dubokim izvlačenjem, sa nanokeramičkim antikorozivnim premazom
Amortizacija udara	Trostepeni sistem gumenog prigušenja
Izjava o kvalitetu	Opis iz izvora navodi proizvodnju u skladu sa sistemom kvaliteta ISO 9001

Konfiguracija i poručivanje

Osnovna jedinica centrifuge

Kućište centrifuge LACE32
 Kabl za napajanje
 Radna dokumentacija
 Osnovni servisni elementi / alati prema potvrdi

Izbor rotora

Horizontalni rotor
 Ugaoni rotor
 Rotor za mikroploče
 Čašice/adapteri po potrebi

Potrebna potvrda

Dimenzije i broj epruveta
 Ciljna brzina / RCF
 SKU rotora, čašica i adaptera
 Uključeni i opciono elementi

Granica podataka: vrednosti koje nisu navedene u dostavljenom CSV-u ili izvornom tekstu — kao što su tačne dimenzije, neto masa, električni podaci, nazivna snaga i buka — namerno ovde nisu navedene. Dodajte ih kada uputstvo ili tehnički list za LACE32 odobren od proizvođača bude dostupan.


POTVRDITE KONFIGURACIJU

SMERNICE ZA IZBOR ROTORA

Portfolio rotora

Horizontalne, ugaone konfiguracije i konfiguracije za mikroploče | Deo 1 od 2

Rotor Configurations – Tube Capacity Overview

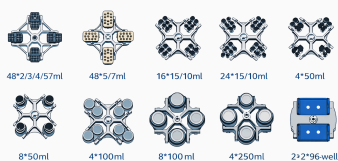

Rotor Configurations – Tube Capacity Overview

Horizontalni rotor 48 × 5 ml
SKU PRO2879

Navedeno: 6000 o/min / 6321 × g

Tip: Swing-out

Unakrsno: PRO6925



Horizontalni rotor 32 × 10 ml
SKU PRO2887

Liste naziva: 6000 o/min / 6321 × g

Napomena o ranijoj verziji: 4000 o/min / 2880 × g

Unakrsno: PRO6925



Ugaoni rotor 8 × 50 ml
SKU PRO3314

Liste naziva: 6000 o/min / 6321 × g

Napomena o ranijoj verziji: 4000 o/min / 2250 × g

Unakrsno: PRO6925



Rotor za 2 × 2 × 96 mikroploče
SKU PRO3376

Navedeno: 6000 o/min / 6321 × g

Tip: Rotor za mikroploče

Unakrsno: PRO6925

Oznaka važnog neslaganja: za PRO2887 i PRO3314 polja naziva i opisa proizvoda u dostavljenom CSV fajlu sadrže različite vrednosti brzine/RCF. Obe vrednosti su transparentno prikazane; pre izdavanja ponude ili rada pribavite pisanu potvrdu.

POTVRDITE KONFIGURACIJU
SMERNICE ZA IZBOR ROTORA

Portfolio rotora

Swing-out i ugaone konfiguracije | Deo 2 od 2




Swing rotor 32 × 15 ml
SKU PRO5527

Navedeno: 6000 o/min / 6321 × g

Tip: Swing rotor

Unakrsno: PRO6925

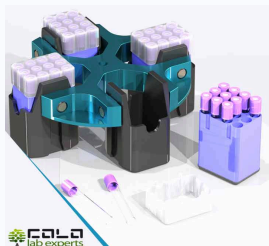

Horizontalni rotor 72 × 5/7 ml
SKU PRO5529

Navedeno: 6000 o/min / 6321 × g

Tip: Swing rotor

Unakrsno: PRO6925



Horizontalni rotor 4 × 250 ml, ravno dno
SKU PRO5530

Liste naziva: 6000 o/min / 6321 × g

Napomena o ranijoj verziji: 4000 o/min / 2840 × g

Adapteri: 4×100; 4×2×50; 4×3×15 ml



Ugaoni rotor 12 × 10 ml
SKU PRO7063

Navedeno: 6000 o/min / 6321 × g

Tip: Ugaoni rotor

Unakrsno: PRO6925 / PRO3051



Horizontalni rotor 4 × 250 ml, četvrtasta čašica
SKU PRO6946

Navedeno: 6000 o/min / 6321 × g

Adapteri: 50, 15, 10, 5 i 1,5 ml; epruvete za krv

Unakrsno: PRO6932 / PRO6925

Provera slike i artikla: CSV povezuje PRO5529 sa slikom pod nazivom „4x500ml-square“ i koristi iste slike za više različitih kapaciteta. Ove veze su preuzete iz izvornih podataka i treba ih ispraviti ako su dostupne fotografije specifične za proizvod.

Kako izabrati pravu konfiguraciju LACE32

Ovih 7 podataka određuje rotor, čašice i adaptere – pošaljite ih uz upit.

- 1 Zapremina uzorka**
ukupna zapremina po ciklusu i zapremina po posudi
- 2 Format epruveta ili ploča**
epruvete, boce do 250 ml ili mikroploče
- 3 Geometrija dna epruvete**
konusno ili okruglo dno – od toga zavisi izbor adaptera
- 4 Ciljni RCF (× g)**
sila koju zahteva vaša metoda, ne samo broj obrtaja
- 5 Uravnoteženje**
broj uzoraka po ciklusu i simetrično punjenje rotora
- 6 Mikroploče**
da li radite i sa mikropločama – za njih je potreban poseban rotor
- 7 Rotor i adapteri**
konačnu kombinaciju potvrđujemo u obavezujućoj ponudi

Pošaljite ove podatke

sales@colo.si · +381 64 659 14 21
predložićemo odgovarajuću konfiguraciju

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

BRZI KONTAKT

colo.si
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

Zatražite ponudu ili smernice za konfiguraciju rotora

Navedite željeni format epruveta ili ploča, opseg zapremine uzoraka, kapacitet obrade i ciljnu relativnu centrifugalnu silu. COLO vam može pomoći da odaberete odgovarajuću konfiguraciju rotora, čašica i adaptera za LACE32.

Pregled centrifuga

Katalog centrifuga

Zatražite ponudu

Kontaktirajte službu prodaje

Napomena o obavezujućoj specifikaciji: Ovaj dokument služi kao pomoć pri izboru proizvoda i ne zamenjuje obavezujuću ponudu, potvrdu narudžbine, uputstvo proizvođača niti sertifikat rotora. Performanse rotora zavise od konfiguracije. Dostavljeni CSV sadrži nekoliko protivrečnih opisa i ponovo korišćene ili neodgovarajuće veze ka slikama; te stavke su označene u ovom dokumentu. Pre poručivanja ili upotrebe potvrdite SKU, uključeni rotor, čašice, adaptere, maksimalnu dozvoljenu brzinu/RCF, električne podatke, dimenzije, masu i bezbednosnu dokumentaciju. Specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.