DRYSA18, materijal komore: galvanski zaštićena | polirani nerđajući čelik

Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE · TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DRYSA18

Suvi sterilizator 18 L · topli vazduh, prirodna konvekcija · LED kontroler · ST+10 °C do 300 °C

Suvi sterilizator DRYSA18 je mali stoni uređaj na topli vazduh za salone, ordinacije i male laboratorije. Suvom toplotom steriliše metalne instrumente i staklo, a radi i kao sušnica, od 10 °C iznad sobne temperature do 300 °C. Nema ventilator: topli vazduh se sam diže, pa je uređaj tih i jednostavan. PID kontroler sa LED displejem i tajmer do 9999 min su standard. Dve verzije: galvanski zaštićena komora ili komora od poliranog nerđajućeg čelika.

18 L | ST+10 °C DO 300 °C | TOPLI VAZDUH, BEZ VENTILATORA | LED DISPLEJ | PID KONTROLER | TAJMER 0–9999 MIN

Vrsta dokumenta: **Tehnička specifikacija**
Porodica proizvoda: **DRYSA18 suvi sterilizatori (topli vazduh), stoni, 18 L**
Modeli / SKU: **DRYSA18 · PRO2994 | DRYSA18S · PRO8274**
Format: **A4 položeno · CORE-TECHSPEC 1.2**

STRANICA PROIZVODA DRYSA18 | SUŠNICE — PREGLED | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽITE PONUDU


TOPLI VAZDUH ST+10 °C do 300 °C

18 L
DRYSA18 · PRO2994
galvanski zaštićena komora

18 L
DRYSA18S · PRO8274
komora od poliranog nerđajućeg čelika



DRYSA18 · stoni suvi sterilizator

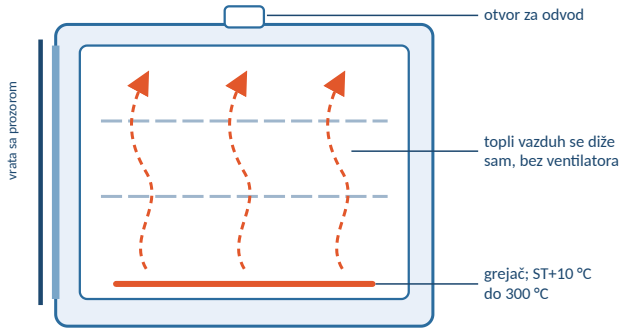

Unutrašnjost komore · prirodna konvekcija

ZAPREMINA
18 L

ADRESA
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

DRYSA18 · tehnička specifikacija

Stoni suvi sterilizator (topli vazduh), 18 L, ST+10 °C do 300 °C, prirodna konvekcija, dva materijala komore

18 L | ST+10 °C DO 300 °C | TOPLI VAZDUH, BEZ VENTILATORA | LED DISPLEJ | PID KONTROLER — Mali, tih, jednostavan

Pregled proizvoda

Izaberite komoru

DRYSA18: galvanski zaštićena komora — ekonomičan izbor za suve instrumente i staklo.

DRYSA18S: komora od poliranog nerđajućeg čelika — lakše se briše i otpornija je na vlagu i često čišćenje.

Isto kod oba: veličina, opseg temperature, kontroler, tajmer i police.

Glavne karakteristike

Temperatura: ST+10 °C do 300 °C, rezolucija 0,1 °C.

Cirkulacija vazduha: prirodna konvekcija, bez ventilatora.

Upravljanje: PID kontroler sa LED displejem, tajmer 0–9999 min.

Bezbednost: zvučni i svetlosni alarm prekoračenja temperature.

Komora: 260 × 260 × 260 mm; isporučuju se 2 police, 6 položaja polica, 15 kg po polici.

Vrata: prozor i ručka koja ostaje hladna.

Napajanje: 220 V, 50/60 Hz, 0,6 kW; 110 V na zahtev.

Primena

Sterilizacija suvom toplotom: metalni instrumenti i staklo u kozmetičkim i frizerskim salonima, pedikiru, stomatološkim i veterinarskim ordinacijama.

Sušenje: staklo i mali uzorci u laboratoriji ili školi.

Zagrevanje: grejanje i termička obrada malih predmeta do 300 °C.

Nije za: tečnosti, tekstil, plastiku i druge predmete koji ne podnose suvu toplotu.

Osnovni tehnički podaci

Parametar	DRYSA18	DRYSA18S
SKU	PRO2994	PRO8274
Komora	galvanski zaštićena	polirani nerđajući čelik
Zapremina komore	18 L	18 L
Opseg temperature	ST+10 °C do 300 °C	
Cirkulacija vazduha	prirodna konvekcija, bez ventilatora	
Stabilnost temperature	±1 °C; ujednačenost ±3,5 %	
Upravljanje	PID, LED displej, tajmer 0–9999 min	
Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 0,6 kW; 110 V na zahtev	

ZAPREMINA	TEMPERATURA	VAZDUH	TAJMER
18 L	ST+10 °C do 300 °C	Prirodno, bez ventilatora	0–9999 min

ST = sobna temperatura; zadata vrednost mora biti najmanje 10 °C iznad temperature prostorije. Temperaturu i vreme sterilizacije korisnik podešava prema postupku koji važi za njegov rad.

STRANICA PROIZVODA DRYSA18 | SUŠNICE — PREGLED | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽITE PONUDU

Modeli i materijal komore

Model	SKU	Zapremina	Materijal komore	Komora Š × D × V	Spolja Š × D × V	Snaga grejanja	Neto masa
DRYSA18	PRO2994	**18 L**	galvanski zaštićena	260 × 260 × 260 mm	380 × 455 × 568 mm	0,6 kW	27 kg
DRYSA18S	PRO8274	**18 L**	polirani nerđajući čelik	260 × 260 × 260 mm	380 × 455 × 568 mm	0,6 kW	27 kg

Uz svaki uređaj isporučuju se dve police; 6 položaja polica na razmaku 29 mm, najveće opterećenje 15 kg po polici. Mere pakovanja 500 × 530 × 657 mm, bruto masa 35 kg.

Tehničke specifikacije

Temperatura i upravljanje	Vrednost
Cirkulacija vazduha	prirodna konvekcija, bez ventilatora
Opseg temperature	ST+10 °C do 300 °C
Rezolucija	0,1 °C
Kolebanje temperature	±1 °C
Ujednačenost temperature	±3,5 %
Upravljanje	PID kontroler, LED displej, tasteri
Tajmer	0–9999 min, sa funkcijom čekanja
Senzor	termopar, tip K

Komora, kućište i napajanje	Vrednost
Komora	DRYSA18: galvanski zaštićena; DRYSA18S: polirani nerđajući čelik
Kućište	hladno valjani čelik, plastificiran
Izolacija	kamena vuna
Grejač	grejna žica od nikl-hroma
Police	isporučuju se 2; 6 položaja; 15 kg po polici
Otvor za odvod	Ø 28 mm, gore; služi i kao otvor za sondu
Zaštita	alarm prekoračenja temperature, zvučni i svetlosni
Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 2,7 A, 0,6 kW; 110 V na zahtev

ST = sobna temperatura. Mere u mm, Š × D × V.

STRANICA PROIZVODA DRYSA18 | SUŠNICE — PREGLED | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽITE PONUDU

Grejanje, upravljanje i komora

Suva toplota bez ventilatora

Prirodna konvekcija: topli vazduh se sam diže od grejača kroz komoru; nema ventilatora i nema buke.

PID kontroler: izmerena temperatura u gornjem redu LED displeja, zadata u donjem.

Opseg: od 10 °C iznad sobne temperature do 300 °C.

Tajmer i bezbednost

Tajmer: 0–9999 min sa funkcijom čekanja; grejanje se automatski isključuje na kraju zadatog vremena.

Alarm: zvučni i svetlosni kada temperatura pređe granicu.

Memorija: podešavanja ostaju sačuvana posle nestanka struje; parametri se mogu zaključati.

Komora

Dva materijala: galvanski zaštićena (DRYSA18) ili polirani nerđajući čelik (DRYSA18S).

Police: isporučuju se 2, 6 položaja, 15 kg po polici.

Otvor za odvod: Ø 28 mm gore, služi i kao otvor za sondu referentnog termometra.

Dobra praksa

Pre sterilizacije: očistite i osušite instrumente; suva toplota ne zamenjuje čišćenje.

Punjenje: složite predmete u jedan sloj i ostavite razmak između njih i zidova da topli vazduh dopre do svake površine.

Ciklus: podesite temperaturu i vreme prema svom postupku; sačekajte da se predmeti ohlade pre vađenja.

Ne unositi: zapaljive i eksplozivne materijale ni materijale sa rastvaračima.

Postavljanje i održavanje

Mesto: ravan sto otporan na toplotu, sa slobodnim prostorom oko uređaja i iznad otvora za odvod.

Napajanje: uzemljena utičnica 220 V.

Čišćenje: neutralni deterdžent i suva krpa, kada je uređaj hladan; ne koristiti kiseline ni baze u komori.

TEMPERATURA	VAZDUH	DISPLEJ	TAJMER
ST+10 °C do 300 °C	**Prirodno, bez ventilatora**	**LED, 0,1 °C**	**0–9999 min**

ST = sobna temperatura.

STRANICA PROIZVODA DRYSA18 | SUŠNICE — PREGLED | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽITE PONUDU

Slike, izbor konfiguracije i podrška



DRYSA18 suvi sterilizator · 18 L

Podaci za naručivanje

Artikal	SKU
DRYSA18 suvi sterilizator, 18 L, galvanski zaštićena komora	PRO2994
DRYSA18S suvi sterilizator, 18 L, komora od poliranog nerđajućeg čelika	PRO8274
Dodatna polica	na zahtev

Provera pre naručivanja

Komora: galvanski zaštićena komora za suve predmete; polirani nerđajući čelik kada se komora često čisti.

Veličina: komora od 18 L je široka, duboka i visoka 260 mm; za veće količine pogledajte seriju DRYSD od 30 L.

Temperatura: radna temperatura do 300 °C; zadata vrednost mora biti najmanje 10 °C iznad sobne.

Napajanje: 220 V ili 110 V; potvrdite napon i tip utikača za svoju zemlju.

DOBAVLJAČ I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: Pošaljite šta sterilišete ili sušite i koliko po jednom ciklusu. COLO.Science potvrđuje model i rok isporuke.

BRZI KONTAKT

colo.si

sales@colo.si

+381 64 659 14 21

COLO.SCIENCE · PODRŠKA ZA SUŠENJE I GREJANJE

Koja verzija DRYSA18 odgovara vašem radu?

Pošaljite predmete i količinu po ciklusu. COLO.Science predlaže verziju i potvrđuje konfiguraciju u ponudi.

Veb: **colo.si**

Pitajte nas:
Cena i aktuelni popust, rok isporuke, instalacija, podrška za primenu i servis — pišite na sales@colo.si ili nas pozovite.

STRANICA PROIZVODA DRYSA18 | SUŠNICE — PREGLED | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽITE PONUDU