Seria MBINH, volumul camerei: 45L 65L 125L 210L

Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE · SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

MBINH

Seria de incubatoare de laborator · Circulație forțată a aerului · Lumină și lampă UV · TC+5 °C până la 70 °C · 45, 65, 125 și 210 L

Incubatoarele de laborator MBINH combină circulația aerului cu ventilator cu iluminare interioară și lampă UV, într-o cameră din oțel inoxidabil. Ventilatorul distribuie căldura de la 5 °C peste temperatura camerei până la 70 °C; lampa UV ajută la menținerea curățeniei camerei goale între cicluri și se oprește automat la deschiderea ușii exterioare. Controlerul LCD setează și afișează temperatura. Patru mărimi: 45, 65, 125 și 210 L.

45 · 65 · 125 · 210 L | TC+5 °C PÂNĂ LA 70 °C | AER FORȚAT | LUMINĂ + LAMPĂ UV | CONTROLER LCD | CAMERĂ DIN INOX

Tip document: **Fișă de specificații tehnice**
Familie de produse: **Incubatoare de laborator MBINH cu ventilator, lumină și lampă UV**
Modele / SKU: **MBINH45 · PRO8258 | MBINH65 · PRO8259 | MBINH125 · PRO8260 | MBINH210 · PRO8261**
Format: **A4 peisaj · CORE-TECHSPEC 1.2**


PAGINA PRODUSULUI MBINH | INCUBARE — PREZENTARE | CATALOG INCUBATOARE | CEREȚI O OFERTĂ

DOAR ÎNCĂLZIRE TC+5 °C până la 70 °C

45 L	65 L	125 L	210 L
MBINH45 · PRO8258	MBINH65 · PRO8259	MBINH125 · PRO8260	MBINH210 · PRO8261



MBINH · vedere din față și laterală

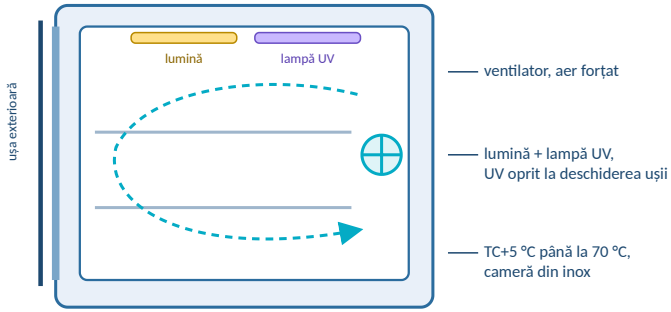

Schematic, nu la scară

În interiorul camerei · ventilator, lumină și lampă UV

VOLUME
45 · 65 · 125 · 210 L

ADRESĂ / SEDIU
Polje ob Sotli 4
SI-3255, Slovenia

CONTACT
sales@colo.si
+386 70 713 437

MBINH · specificație tehnică

Incubatoare de laborator cu aer forțat, iluminare interioară și lampă UV, 45 până la 210 L, TC+5 °C până la 70 °C, controler LCD

45–210 L | TC+5 °C PÂNĂ LA 70 °C | AER FORȚAT | LUMINĂ + UV | CONTROLER LCD — Temperatură uniformă, cameră curată

Prezentarea produsului

Alegeți volumul

45 L: un singur utilizator, câteva suporturi de plăci; dimensiune de masă.
65 L: rutina zilnică a unui laborator mic.
125 L: un incubator comun pentru un grup.
210 L: cea mai mare cameră, pentru serii mai mari și recipiente voluminoase.

Profil de aplicații

Microbiologie: cultivarea bacteriilor și fungilor la 25–37 °C, cu circulația aerului asigurată de ventilator.
Cameră curată: lampa UV ajută la menținerea curățeniei camerei goale între cicluri.
Observare: iluminare interioară pentru verificarea culturilor.
Control al calității și cercetare: laboratoare alimentare, farmaceutice, de mediu și didactice.

Caracteristici principale

Temperatură: TC+5 °C până la 70 °C.
Circulația aerului: forțată, cu ventilator.
Control: controler LCD.
Lumină și UV: iluminare interioară și lampă UV; lampa UV se oprește la deschiderea ușii exterioare.
Cameră: oțel inoxidabil.
Mărimi: 45, 65, 125 și 210 L, camera interioară de la 350 × 350 × 350 mm până la 600 × 580 × 600 mm.
Alimentare: 220 V; 110 V la cerere.

Rezumat tehnic de bază

Parametru	Specificație
Modele	MBINH45 · 65 · 125 · 210
Volumul camerei	**45 · 65 · 125 · 210 L**
Domeniu de temperatură	TC+5 °C până la 70 °C
Circulația aerului	forțată, cu ventilator
Lumină / UV	iluminare interioară, lampă UV
Control	Controler LCD
Cameră	oțel inoxidabil
Alimentare	220 V; 110 V la cerere

VOLUME	TEMPERATURĂ	AER	IGIENA CAMEREI
45 până la 210 L	TC+5 °C până la 70 °C	Forțat, cu ventilator	Lumină + lampă UV

TC = temperatura camerei; valoarea setată trebuie să fie cu cel puțin 5 °C peste temperatura încăperii. Adecvarea pentru o anumită metodă se confirmă în oferta COLO.Science.

PAGINA PRODUSULUI MBINH | INCUBARE — PREZENTARE | CATALOG INCUBATOARE | CEREȚI O OFERTĂ

Modele și volumele camerei

Model	SKU	Volumul camerei	Camera interioară L × A × Î	Alimentare
MBINH45	PRO8258	**45 L**	350 × 350 × 350 mm	220 V; 110 V la cerere
MBINH65	PRO8259	**65 L**	400 × 350 × 450 mm	220 V; 110 V la cerere
MBINH125	PRO8260	**125 L**	500 × 450 × 550 mm	220 V; 110 V la cerere
MBINH210	PRO8261	**210 L**	600 × 580 × 600 mm	220 V; 110 V la cerere

Dimensiunile exterioare, puterea și masa se confirmă în oferta COLO.Science.

Specificații tehnice

Temperatură și control	Valoare
Circulația aerului	forțată, cu ventilator
Domeniu de temperatură	TC+5 °C până la 70 °C
Încălzire	doar încălzire; valoarea setată cu cel puțin 5 °C peste temperatura camerei
Control	Controler LCD
Mărimi	45, 65, 125 și 210 L

Cameră, lumină și alimentare	Valoare
Cameră	oțel inoxidabil
Lumină	iluminare interioară
lampă UV	se oprește automat la deschiderea ușii exterioare
Alimentare	220 V; 110 V la cerere

TC = temperatura camerei. Dimensiuni în mm, L × A × Î.

PAGINA PRODUSULUI MBINH | INCUBARE — PREZENTARE | CATALOG INCUBATOARE | CEREȚI O OFERTĂ

Circulația aerului, lumină și UV

Temperatură uniformă

Aer forțat: ventilatorul mișcă aerul cald prin toată camera.

Controler LCD: setați temperatura și citiți-o pe afișaj.

Domeniu: de la 5 °C peste temperatura camerei până la 70 °C.

Lumină și UV

Iluminare interioară: verificați culturile la lumină.

Lampă UV: ajută la menținerea curățeniei camerei goale între cicluri.

Siguranță: lampa UV se oprește la deschiderea ușii exterioare.

Cameră

Oțel inoxidabil: pereți netezi ai camerei, ușor de șters.

Patru mărimi: 45, 65, 125 și 210 L, cu aceleași funcții.

Ușa exterioară: la deschidere, lampa UV se oprește.

Bune practici

Valoare setată: mențineți-o cu cel puțin 5 °C peste temperatura camerei.

Lampă UV: folosiți-o doar cu camera goală și ușa închisă; lumina UV deteriorează culturile și pielea.

Încărcare: lăsați spațiu între recipiente și pereții camerei, pentru ca aerul să poată circula.

Instalare și întreținere

Amplasare: masă de lucru sau pardoseală orizontală, departe de soarele direct și de alte surse de căldură sau frig, cu spațiu liber față de perete.

Alimentare: priză de 220 V cu împământare.

Curățare: detergent neutru și o lavetă uscată; nu folosiți acizi sau baze pe camera din oțel inoxidabil.

TEMPERATURĂ	AER	LUMINĂ	LAMPĂ UV
TC+5 °C până la 70 °C	**Forțat, cu ventilator**	**Iluminare interioară**	**Oprit la deschiderea ușii**

TC = temperatura camerei.

PAGINA PRODUSULUI MBINH | INCUBARE — PREZENTARE | CATALOG INCUBATOARE | CEREȚI O OFERTĂ

Imagini, recomandări de configurare și asistență



Incubator de laborator MBINH · 45 până la 210 L

Informații pentru comandă

Articol	SKU
MBINH45 incubator de laborator, 45 L, ventilator, lumină și lampă UV	PRO8258
MBINH65 incubator de laborator, 65 L, ventilator, lumină și lampă UV	PRO8259
MBINH125 incubator de laborator, 125 L, ventilator, lumină și lampă UV	PRO8260
MBINH210 incubator de laborator, 210 L, ventilator, lumină și lampă UV	PRO8261

Listă de verificare pentru configurare

Volum: 45, 65, 125 sau 210 L — în funcție de numărul de recipiente pe ciclu.

Temperatură: de obicei 25–37 °C; valoarea setată trebuie să fie cu cel puțin 5 °C peste temperatura încăperii.

Aer: aer forțat cu ventilator; pentru convecție naturală, vezi MBIND.

Alimentare: 220 V sau 110 V; confirmați tensiunea și tipul de ștecher pentru țara dvs.

FURNIZOR ȘI ASISTENȚĂ

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

Recomandări de selecție: Trimiteți recipientele, numărul acestora pe ciclu și temperatura de lucru. COLO.Science va confirma modelul și termenul de livrare.

CONTACT RAPID

colo.si

sales@colo.si

+386 70 713 437

COLO.SCIENCE · ASISTENȚĂ ÎN MICROBIOLOGIE

Ce dimensiune MBINH se potrivește laboratorului dumneavoastră?

Trimiteți recipientele și numărul acestora pe ciclu. COLO.Science va propune dimensiunea și va confirma configurația în ofertă.

Web: **colo.si**

Întrebați-ne:
Preț și reducerea actuală, termen de livrare, instalare, asistență pentru aplicații și service — scrieți la sales@colo.si sau sunați-ne.

PAGINA PRODUSULUI MBINH | INCUBARE — PREZENTARE | CATALOG INCUBATOARE | CEREȚI O OFERTĂ