

KJELFASTER-A24

Autosampler Kjeldahl • 24 de poziții • pentru KJELFASTER-K900 • rezervoare de reactivi 4 × 15 L

KJELFASTER-A24 Autosampler Kjeldahl este un autosampler cu 24 de poziții pentru serii Kjeldahl fără supraveghere pe analizorul KJELFASTER-K900. Aduce eprubetele de mineralizare $\varnothing 42 \text{ mm} \times 300 \text{ mL}$ la analizor, păstrează poziția de spălare separată de pozițiile de test pentru a preveni contaminarea încrucișată și are rezervoare de reactivi 4 × 15 L pentru aprox. 500 de analize per umplere. Este alimentat și comandat de K900 prin CAN (24 V DC, 40 W), deci nu necesită alimentare separată.

AUTOSAMPLER KJELDAHL

24 DE POZIȚII

DOAR PENTRU KJELFASTER-K900

POZIȚIE SEPARATĂ DE SPĂLARE

REZERVOARE 4 × 15 L

≈500 ANALIZE PER UMLERE

CAN • 24 V DC

FĂRĂ ALIMENTARE SEPARATĂ

Tip document: **Specificație tehnică**

Produs: **KJELFASTER-A24 Autosampler Kjeldahl**

SKU: **PRO7166**


Format: **A4 peisaj • 5 pagini**

KJELFASTER-A24 PAGINA PRODUSULUI

ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ — PREZENTARE

CATALOG ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ

CEREȚI O OFERTĂ

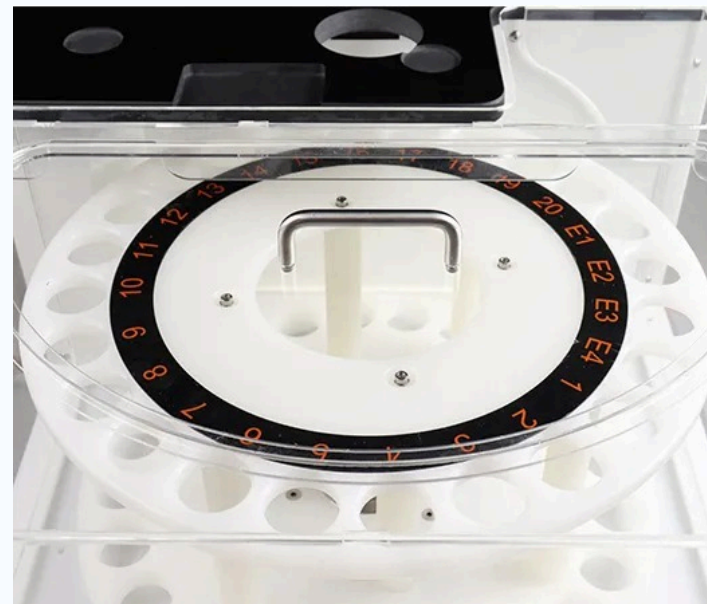

KJELFASTER-A24 • Autosampler Kjeldahl



Stație Kjeldahl automatizată • KJELFASTER-K900 cu autosamplerul KJELFASTER-A24

MODEL / SKU

**KJELFASTER-A24
PRO7166**

ADRESĂ

**Polje ob Sotli 4
SI-3255, Slovenia**

CONTACT

**sales@colo.si
+386 70 713 437**

KJELFASTER-A24 • specificație tehnică

Serii de 24 de probe fără supraveghere, cu capacitate mare de reactivi

24 DE POZIȚII

REZERVOARE 4 × 15 L

≈500 ANALIZE PER UMLERE

CAN • 24 V DC • 40 W

920 × 625 × 908 MM

— Extinde KJELFASTER-K900 la funcționare fără supraveghere peste noapte și în ture

Prezentarea produsului

Domenii de utilizare

Laboratoare cu număr mare de probe: 24 de probe mineralizate per serie, fără prezența operatorului.

Lucru noaptea și în ture: seria rulează în timp ce personalul pregătește următoarea mineralizare.

Laboratoare acreditate: toate rezultatele intră în memoria K900 cu audit trail.

Laboratoare de servicii: capacitate previzibilă și mai puține completări de reactivi.

Caracteristici principale

Capacitate: 24 de probe per serie, eprubete $\varnothing 42$ mm × 300 mL.

Mișcare: viteza rotorului $\geq 0,04$ rot/s, viteza de prelevare ≥ 40 mm/s.

Reactivi: rezervoare 4 × 15 L, aprox. 500 de analize per umplere.

Conexiune: CAN către K900; 24 V DC, 40 W de la analizor.

Dimensiuni: 920 × 625 × 908 mm, 80 kg.

Date tehnice principale

Parametru	Valoare
Model	KJELFASTER-A24
SKU	PRO7166
Tip aparat	Autosampler Kjeldahl
Capacitate	24 de probe per serie
Eprubete de mineralizare	$\varnothing 42$ mm, 300 mL (standard, format deschis)
Rezervoare de reactivi	4 × 15 L
Analize per umplere	aprox. 500
Conexiune	CAN (către KJELFASTER-K900)
Putere nominală	40 W
Compatibilitate	doar KJELFASTER-K900

Valoare pentru laborator

Funcționare autonomă: încărcați 24 de eprubete mineralizate și K900 rulează singur seria.

Fără contaminare încrucișată: poziția de spălare este separată de pozițiile de test.

Mai puține completări: rezervoare 4 × 15 L pentru aprox. 500 de analize per umplere.

Instalare simplă: alimentat și comandat de K900 prin CAN — fără alimentare separată.

POZIȚII
24

REZERVOARE
4 × 15 L

PER UMLERE
≈500 analize

PUTERE NOMINALĂ
40 W

Valorile tehnice servesc la alegerea produsului; configurația livrată se confirmă în oferta oficială COLO.Science. Fiecare sistem Kjeldahl este susținut de COLO.Science prin instalare, instruirea operatorilor, validarea metodei pe proba dumneavoastră și service local.

KJELFASTER-A24 PAGINA PRODUSULUI

ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ — PREZENTARE

CATALOG ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ

CEREȚI O OFERTĂ

Parametri tehnici

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Model	KJELFASTER-A24	Rezervoare de reactivi	4 × 15 L
SKU	PRO7166	Analize per umplere	aprox. 500
Tip aparat	Autosampler Kjeldahl	Conexiune	CAN (către KJELFASTER-K900)
Capacitate	24 de probe per serie	Alimentare	24 V DC de la analizor
Eprubete de mineralizare	φ42 mm, 300 mL (standard, format deschis)	Putere nominală	40 W
Poziție de spălare	separată de pozițiile de test	Compatibilitate	doar KJELFASTER-K900
Viteza rotorului	≥0,04 rot/s	Dimensiuni (L×A×Î)	920 × 625 × 908 mm
Viteza de prelevare	≥40 mm/s	Greutate	80 kg

Note la specificație

Compatibilitate: funcționează doar cu KJELFASTER-K900; nu cu K300, K500 sau K700.

Productivitate: 24 de poziții per serie; pentru mai multe serii pe tură planificați reîncărcarea în timpul următoarei mineralizări.

Instalare: spațiul pe banc pentru analizor și autosampler alăturate se confirmă în ofertă.

[KJELFASTER-A24 PAGINA PRODUSULUI](#)[ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ — PREZENTARE](#)[CATALOG ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ](#)[CEREȚI O OFERTĂ](#)

Opțiuni și accesorii



PRO3572

Analizor complet automat KJELFASTER-K900

Ecran tactil 10", 0,2–1,0 µL/pas, 21 CFR Part 11, 1 milion de rezultate, 0,5 L/min apă.

Opțional



PRO3576

Digestor Kjeldahl cu infraroșu KJELDIG-D450

Infraroșu + grafit, 400 °C în 25 min, 20 de programe; hotă și suport de răcire incluse.

Opțional



PRO3575

Digestor Kjeldahl KJELDIG-D250

20 × 300 mL, până la 450 °C, ±1 °C, 10 programe × 5 pași; hotă inclusă.

Opțional



PRO5814

Scrubber EXSC5

Neutralizare în trei trepte: condensare cu apă, bază, cărbune activ; aspirație reglabilă.

Opțional



Eprubete de mineralizare $\varnothing 42 \times 300$ mL (set)

Eprubete standard, format deschis, pentru toate digestoarele KJELDIG și unitățile KJELFAST / KJELFASTER — aceeași eprubetă de la mineralizare la distilare.

Opțional

Alte opțiuni și consumabile

SKU	Articol	Utilizare	Stare
—	Reactivi: acid sulfuric, NaOH 40 %, acid boric cu indicator, acid standard	Consumabile — se comandă separat	Opțional
—	Tablete de catalizator Kjeldahl	Mineralizare — consumabil, se comandă separat	Opțional


Livrarea standard se confirmă în ofertă. A24 necesită un KJELFASTER-K900; eprubetele de mineralizare și reactivii se comandă separat.

KJELFASTER-A24 PAGINA PRODUSULUI

ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ — PREZENTARE

CATALOG ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ

CEREȚI O OFERTĂ

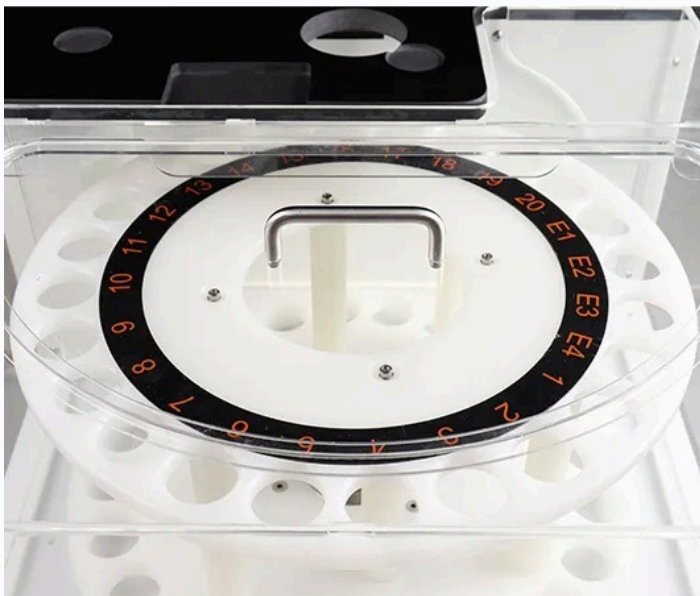

KJELFASTER-A24 autosampler Kjeldahl

Informații pentru comandă

Articol	Valoare
Model	KJELFASTER-A24
SKU	PRO7166
Tip aparat	Autosampler Kjeldahl
Necesar	KJELFASTER-K900
Capacitate	24 de probe per serie
Rezervoare de reactivi	4 × 15 L
Conexiune	CAN (către KJELFASTER-K900)
Dimensiuni (L×A×Î)	920 × 625 × 908 mm

Listă de configurare

Analizor: K900 deja instalat sau comandat împreună.

Mărimea seriei: 24 de eprubete per rulare.

Banc de lucru: spațiu și capacitate portantă pentru 80 kg lângă analizor.

Reactivi: rezervoare 4 × 15 L — planificați pregătirea reactivilor.

VÂNZĂRI ȘI SUPT

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

Ajutor la alegere: KJELFASTER-A24 este ales când un laborator cu K900 dorește să ruleze serii de 24 de probe fără supraveghere, cu completări minime de reactivi. Pentru încărcare manuală este suficient K900.

CONTACT RAPID

 colo.si

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • SUPT PENTRU CONFIGURAREA SISTEMULUI KJELDAHL

Aveți nevoie de ajutor la configurarea sistemului Kjeldahl?

Spuneți-ne tipurile de probe și numărul zilnic de probe. COLO.Science va configura sistemul cu KJELFASTER-A24 (digestor, scruber, analizor), va valida metoda pe proba dumneavoastră și va trimite o ofertă.

Web: colo.si

Întrebați-ne:

Preț și reducere actuală, termen de livrare, configurarea sistemului pentru probele dvs., instalare și instruire, validarea metodei, eprubete de mineralizare, reactivi și piese de schimb — scrieți la sales@colo.si sau sunați-ne.

KJELFASTER-A24 PAGINA PRODUSULUI

ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ — PREZENTARE

CATALOG ANALIZĂ ELEMENTALĂ ORGANICĂ

CEREȚI O OFERTĂ