

KJELFASTER-A24

Kjeldahl autosampler • 24 pozicije • za KJELFASTER-K900 • 4 × 15 L rezervoara za reagens

KJELFASTER-A24 Kjeldahl autosampler je autosampler sa 24 pozicije za Kjeldahl serije bez nadzora na analizatoru KJELFASTER-K900. Kivete za razaranje $\varnothing 42 \text{ mm} \times 300 \text{ mL}$ dovodi do analizatora, pozicija za pranje je odvojena od mernih pozicija radi sprečavanja unakrsne kontaminacije, a 4 rezervoara od 15 L dovoljna su za oko 500 analiza po punjenju. Napaja ga i njime upravlja K900 preko CAN veze (24 V DC, 40 W), pa posebno napajanje nije potrebno.

KJELDAHL AUTOSAMPLER

24 POZICIJE

SAMO ZA KJELFASTER-K900

ODVOJENA POZICIJA ZA PRANJE

4 × 15 L REZERVOARA

≈500 ANALIZA PO PUNJENJU

CAN • 24 V DC

BEZ POSEBNOG NAPAJANJA

Vrsta dokumenta: **Tehnička specifikacija**

Proizvod: **KJELFASTER-A24 Kjeldahl autosampler**

SKU: **PRO7166**


Format: **A4 položeno • 5 strana**

KJELFASTER-A24 STRANICA PROIZVODA

ORGANSKA ELEMENTARNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTARNE ANALIZE

ZATRAŽI PONUDU

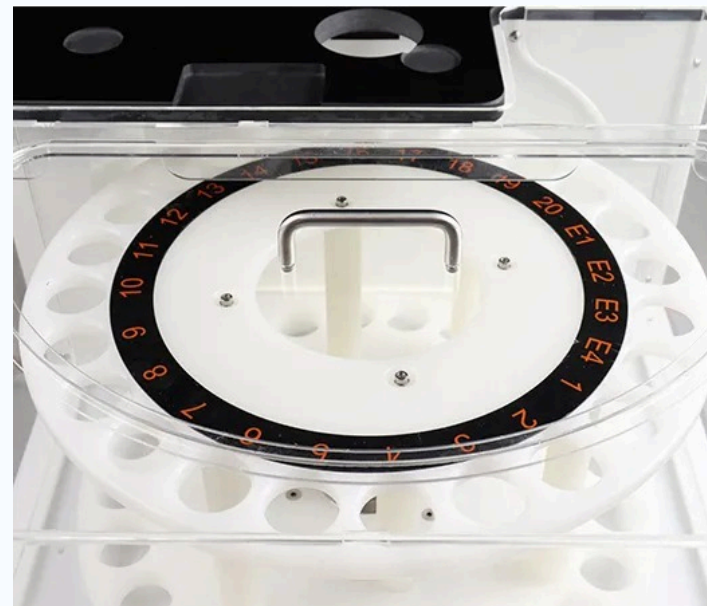

KJELFASTER-A24 • Kjeldahl autosampler



Automatizovana Kjeldahl stanica • KJELFASTER-K900 sa autosamplerom KJELFASTER-A24

MODEL / SKU

**KJELFASTER-A24
PRO7166**

ADRESA

**Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija**

KONTAKT

**sales@colo.si
+381 64 659 14 21**

KJELFASTER-A24 • tehnička specifikacija

Serije od 24 uzorka bez nadzora uz veliki kapacitet reagenasa

24 POZICIJE

4 × 15 L REZERVOARA

≈500 ANALIZA PO PUNJENJU

CAN • 24 V DC • 40 W

920 × 625 × 908 MM

— Proširuje KJELFASTER-K900 na rad bez nadzora preko noći i u smenama

Pregled proizvoda

Primena

Laboratorije sa velikim brojem uzoraka: 24 razorena uzorka po seriji bez prisustva operatera.

Rad noću i u smenama: serija teče dok osoblje priprema sledeće razaranje.

Akreditovane laboratorije: svi rezultati idu u memoriju K900 sa revizijskim tragom.

Ugovorne laboratorije: predvidiv kapacitet i rede dopunjavanje reagenasa.

Vrednost za laboratoriju

Rad bez nadzora: postavite 24 razorene kivete i K900 sam obrađuje seriju.

Bez unakrsne kontaminacije: pozicija za pranje odvojena je od mernih pozicija.

Rede dopunjavanje: 4 × 15 L rezervoara za oko 500 analiza po punjenju.

Jednostavna instalacija: napaja ga i njime upravlja K900 preko CAN — bez posebnog napajanja.

Ključne osobine

Kapacitet: 24 uzorka po seriji, kivete $\varnothing 42$ mm × 300 mL.

Kretanje: brzina rotora $\geq 0,04$ o/s, brzina uzorkovanja ≥ 40 mm/s.

Reagensi: 4 × 15 L rezervoara, oko 500 analiza po punjenju.

Povezivanje: CAN ka K900; 24 V DC, 40 W sa analizatora.

Dimenzije: 920 × 625 × 908 mm, 80 kg.

Osnovni tehnički podaci

Parametar	Vrednost
Model	KJELFASTER-A24
SKU	PRO7166
Vrsta uređaja	Kjeldahl autosampler
Kapacitet	24 uzorka po seriji
Kivete za razaranje	$\varnothing 42$ mm, 300 mL (standardne, otvoreni format)
Rezervoari za reagense	4 × 15 L
Analiza po punjenju	oko 500
Povezivanje	CAN (ka KJELFASTER-K900)
Nazivna snaga	40 W
Kompatibilnost	samo KJELFASTER-K900

POZICIJE

24

REZERVOARI

4 × 15 L

PO PUNJENJU

≈500 analiza

NAZIVNA SNAGA

40 W

Tehničke vrednosti služe za izbor proizvoda; isporučena konfiguracija potvrđuje se u zvaničnoj ponudi COLO.Science. Svaki Kjeldahl sistem COLO.Science prati instalacijom, obukom operatera, validacijom metode na vašem uzorku i lokalnim servisom.

KJELFASTER-A24 STRANICA PROIZVODA

ORGANSKA ELEMENTARNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTARNE ANALIZE

ZATRAŽI PONUDU

Tehnički parametri

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Model	KJELFASTER-A24	Rezervoari za reagense	4 × 15 L
SKU	PRO7166	Analiza po punjenju	oko 500
Vrsta uređaja	Kjeldahl autosampler	Povezivanje	CAN (ka KJELFASTER-K900)
Kapacitet	24 uzorka po seriji	Napajanje	24 V DC sa analizatora
Kivete za razaranje	φ42 mm, 300 mL (standardne, otvoreni format)	Nazivna snaga	40 W
Pozicija za pranje	odvojena od mernih pozicija	Kompatibilnost	samo KJELFASTER-K900
Brzina rotora	≥0,04 o/s	Dimenzije (Š×D×V)	920 × 625 × 908 mm
Brzina uzorkovanja	≥40 mm/s	Masa	80 kg

Napomene uz specifikaciju

Kompatibilnost: radi samo sa KJELFASTER-K900; ne sa K300, K500 ili K700.

Kapacitet: 24 pozicije po seriji; za više serija po smeni planirajte ponovno punjenje tokom sledećeg razaranja.

Instalacija: prostor na stolu za analizator i autosampler jedan pored drugog potvrđuje se u ponudi.

[KJELFASTER-A24 STRANICA PROIZVODA](#)[ORGANSKA ELEMENTARNA ANALIZA — PREGLED](#)[KATALOG ORGANSKE ELEMENTARNE ANALIZE](#)[ZATRAŽI PONUDU](#)

Opcije i pribor



PRO3572

KJELFASTER-K900 potpuno automatski analizator

Ekran na dodir 10", 0,2–1,0 µL/korak, 21 CFR Part 11, 1 milion rezultata, 0,5 L/min vode.

Opciono



PRO3576

KJELDIG-D450 infracrveni Kjeldahl digester

Infracrveni + grafit, 400 °C za 25 min, 20 programa; hauba i stalak za hlađenje u isporuci.

Opciono



PRO3575

KJELDIG-D250 Kjeldahl digester

20 × 300 mL, do 450 °C, ±1 °C, 10 programa × 5 koraka; hauba u isporuci.

Opciono



PRO5814

EXSC5 skruber

Neutralizacija u tri stepena: kondenzacija vodom, baza, aktivni ugalj; podesivo usisavanje.

Opciono



Kivete za razaranje $\varnothing 42 \times 300$ mL (set)

Standardne kivete otvorenog formata za sve KJELDIG digestore i KJELFAST / KJELFASTER uređaje — ista kiveta od razaranja do destilacije.

Opciono

Ostale opcije i potrošni materijal

SKU	Stavka	Namena	Status
—	Reagensi: sumporna kiselina, NaOH 40 %, borna kiselina sa indikatorom, standardna kiselina	Potrošni materijal — poručuje se posebno	Opciono
—	Kjeldahl katalizator u tabletama	Razaranje — potrošni materijal, poručuje se posebno	Opciono

Standardna isporuka potvrđuje se u ponudi. A24 zahteva KJELFASTER-K900; kivete za razaranje i reagensi poručuju se posebno.


KJELFASTER-A24 STRANICA PROIZVODA

ORGANSKA ELEMENTARNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTARNE ANALIZE

ZATRAŽI PONUDU

Slike, izbor konfiguracije i podrška

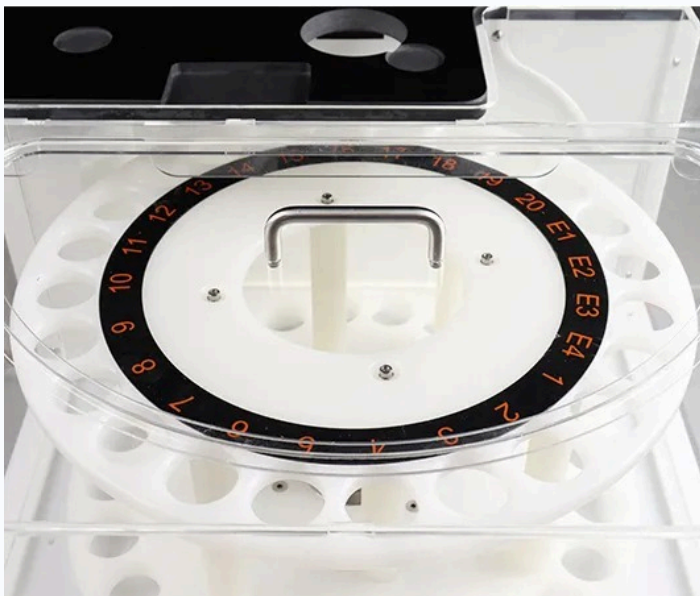

KJELFASTER-A24 Kjeldahl autosampler

Podaci za porudžbinu

Stavka	Vrednost
Model	KJELFASTER-A24
SKU	PRO7166
Vrsta uređaja	Kjeldahl autosampler
Potrebno	KJELFASTER-K900
Kapacitet	24 uzorka po seriji
Rezervoari za reagense	4 × 15 L
Povezivanje	CAN (ka KJELFASTER-K900)
Dimenzije (Š×D×V)	920 × 625 × 908 mm

Lista za konfiguraciju

Analizator: K900 već instaliran ili poručen zajedno.

Veličina serije: 24 kivete po seriji.

Radni sto: prostor i nosivost za 80 kg pored analizatora.

Reagensi: rezervoari 4 × 15 L — planirajte pripremu reagenasa.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: KJELFASTER-A24 se bira kada laboratorija sa K900 želi da serije od 24 uzorka rade bez nadzora uz minimalno dopunjavanje reagenasa. Za ručno punjenje dovoljan je sam K900.

BRZI KONTAKT

 colo.si

 sales@colo.si

 +381 64 659 14 21

COLO.SCIENCE · PODRŠKA ZA KONFIGURACIJU KJELDAHL SISTEMA

Treba vam pomoć oko konfiguracije Kjeldahl sistema?

Javite nam vrste uzoraka i dnevni broj uzoraka. COLO.Science će konfigurisati sistem sa KJELFASTER-A24 (digestor, skruber, analizator), validirati metodu na vašem uzorku i poslati ponudu.

Web: colo.si

Pitajte nas:

Cena i aktuelni popust, rok isporuke, konfiguracija sistema za vaše uzorke, instalacija i obuka, validacija metode, kivete za razaranje, reagensi i rezervni delovi — pišite na sales@colo.si ili nas pozovite.

KJELFASTER-A24 STRANICA PROIZVODA

ORGANSKA ELEMENTARNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTARNE ANALIZE

ZATRAŽI PONUDU