

KJELFASTER-A24

Kjeldahlov podajalnik vzorcev • 24 mest • za KJELFASTER-K900 • 4 × 15 L posode za reagente

KJELFASTER-A24 Kjeldahlov podajalnik vzorcev je podajalnik vzorcev s 24 mesti za Kjeldahlove serije brez nadzora na analizatorju KJELFASTER-K900. Epruvete za razklop $\varnothing 42 \text{ mm} \times 300 \text{ mL}$ dovaja do analizatorja, mesto za čiščenje je ločeno od merilnih mest, kar preprečuje navzkrižno kontaminacijo, štiri posode po 15 L pa zadostujejo za približno 500 analiz na polnjenje. Napaja ga in upravlja K900 prek povezave CAN (24 V DC, 40 W), zato ločeno napajanje ni potrebno.

KJELDAHLOV PODAJALNIK VZORCEV

24 MEST

SAMO ZA KJELFASTER-K900

LOČENO MESTO ZA ČIŠČENJE

4 × 15 L POSODE

≈500 ANALIZ NA POLNENJE

CAN • 24 V DC

BREZ LOČENEGA NAPAJANJA

Vrsta dokumenta: Tehnična specifikacija

Izdelek: KJELFASTER-A24 Kjeldahlov podajalnik vzorcev

SKU: PRO7166


Format: A4 ležeče • 5 strani

KJELFASTER-A24 STRAN IZDELKA

ORGANSKA ELEMENTNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTNE ANALIZE

ZAHTEVAJTE PONUDBO

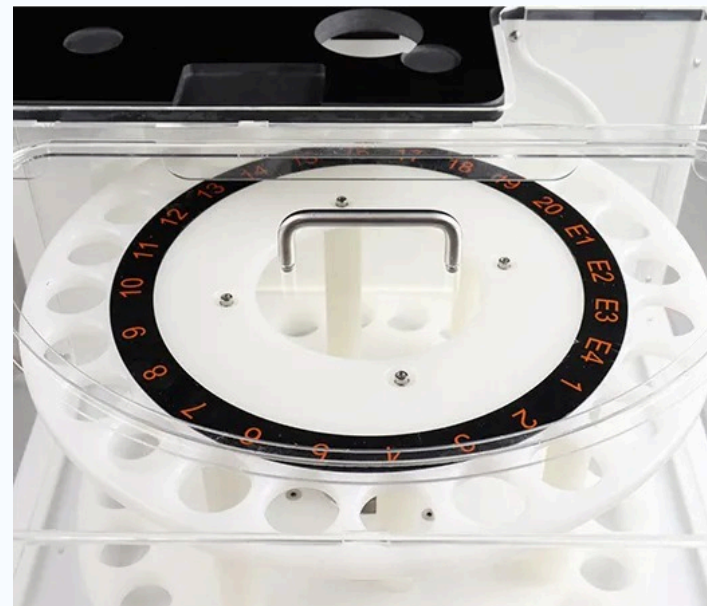

KJELFASTER-A24 • Kjeldahlov podajalnik vzorcev



Avtomatizirana Kjeldahlova postaja • KJELFASTER-K900 s podajalnikom vzorcev KJELFASTER-A24

MODEL / SKU

KJELFASTER-A24
PRO7166

NASLOV

Polje ob Sotli 4
SI-3255, Slovenija

KONTAKT

sales@colo.si
+386 70 713 437

KJELFASTER-A24 • tehnična specifikacija

Serie 24 vzorcev brez nadzora z veliko zmogljivostjo reagentov

24 MEST 4 × 15 L POSODE ≈500 ANALIZ NA POLNJENJE CAN • 24 V DC • 40 W 920 × 625 × 908 MM — Razširi KJELFASTER-K900 na delo brez nadzora ponoči in v izmenah

Pregled izdelka

Uporaba

Laboratoriji z velikim številom vzorcev: 24 razklopljenih vzorcev na serijo brez prisotnosti operaterja.

Nočno in izmensko delo: serija teče, medtem ko osebje pripravlja naslednji razklop.

Akreditirani laboratoriji: vsi rezultati gredo v pomnilnik K900 z revizijsko sledjo.

Pogodbeni laboratoriji: predvidljiva zmogljivost in redkeše dolivanje reagentov.

Vrednost za laboratorij

Delo brez nadzora: vstavite 24 razklopljenih epruvet in K900 sam izvede serijo.

Brez navzkrižne kontaminacije: mesto za čiščenje je ločeno od merilnih mest.

Redkeše dolivanje: 4 × 15 L posode za približno 500 analiz na polnjenje.

Preprosta namestitvev: napaja ga in upravlja K900 prek CAN — brez ločenega napajanja.

Ključne lastnosti

Zmogljivost: 24 vzorcev na serijo, epruvete $\varnothing 42$ mm × 300 mL.

Gibanje: hitrost rotorja $\geq 0,04$ obr/s, hitrost vzorčenja ≥ 40 mm/s.

Reagenti: 4 × 15 L posode, približno 500 analiz na polnjenje.

Povezava: CAN do K900; 24 V DC, 40 W iz analizatorja.

Mere: 920 × 625 × 908 mm, 80 kg.

Osnovni tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Model	KJELFASTER-A24
SKU	PRO7166
Vrsta instrumenta	Kjeldahlov podajalnik vzorcev
Zmogljivost	24 vzorcev na serijo
Epruvete za razklop	$\varnothing 42$ mm, 300 mL (standardne, odprt format)
Posode za reagente	4 × 15 L
Analiz na polnjenje	približno 500
Povezava	CAN (do KJELFASTER-K900)
Nazivna moč	40 W
Združljivost	samo KJELFASTER-K900

MESTA
24

POSODE ZA REAGENTE
4 × 15 L

NA POLNJENJE
≈500 analiz

NAZIVNA MOČ
40 W

Tehnične vrednosti so namenjene izbiri izdelka; dobavljena konfiguracija se potrdi v uradni ponudbi COLO.Science. Vsak Kjeldahlov sistem COLO.Science podpira z namestitvijo, usposabljanjem operaterjev, validacijo metode na vašem vzorcu in lokalnim servisom.

[KJELFASTER-A24 STRAN IZDELKA](#)
[ORGANSKA ELEMENTNA ANALIZA — PREGLED](#)
[KATALOG ORGANSKE ELEMENTNE ANALIZE](#)
[ZAHTEVAJTE PONUDBO](#)

Tehnični parametri

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Model	KJELFASTER-A24	Posode za reagente	4 × 15 L
SKU	PRO7166	Analiz na polnjenje	približno 500
Vrsta instrumenta	Kjeldahlov podajalnik vzorcev	Povezava	CAN (do KJELFASTER-K900)
Zmogljivost	24 vzorcev na serijo	Napajanje	24 V DC iz analizatorja
Epruvete za razklop	φ42 mm, 300 mL (standardne, odprt format)	Nazivna moč	40 W
Mesto za čiščenje	ločeno od merilnih mest	Združljivost	samo KJELFASTER-K900
Hitrost rotorja	≥0,04 obr/s	Mere (Š×G×V)	920 × 625 × 908 mm
Hitrost vzorčenja	≥40 mm/s	Masa	80 kg

Opombe k specifikaciji

Združljivost: deluje samo s KJELFASTER-K900; ne s K300, K500 ali K700.

Zmogljivost: 24 mest na serijo; za več serij na izmeno načrtujte ponovno polnjenje med naslednjim razklopom.

Namestitev: prostor na mizi za analizator in podajalnik drug ob drugem se potrdi v ponudbi.

[KJELFASTER-A24 STRAN IZDELKA](#)[ORGANSKA ELEMENTNA ANALIZA — PREGLED](#)[KATALOG ORGANSKE ELEMENTNE ANALIZE](#)[ZAHTEVAJTE PONUDBO](#)

Opcije in dodatna oprema



PRO3572

Popolnoma avtomatski analizator KJELFASTER-K900

Zaslon na dotik 10", 0,2–1,0 µL/korak, 21 CFR Part 11, 1 milijon rezultatov, 0,5 L/min vode.

Opcijsko



PRO3576

KJELDIG-D450 infrardeči Kjeldahl digestor

Infrardeče + grafit, 400 °C v 25 min, 20 programov; napa in stojalo za hlajenje vključena.

Opcijsko



PRO3575

KJELDIG-D250 Kjeldahl digestor

20 × 300 mL, do 450 °C, ±1 °C, 10 programov × 5 korakov; napa vključena.

Opcijsko



PRO5814

Pralnik EXSC5

Tristopenjska nevtralizacija: kondenzacija z vodo, baza, aktivno oglje; nastavljivo sesanje.

Opcijsko



Epruvete za razklop φ42 × 300 mL (komplet)

Standardne epruvete odprtega formata za vse digestorje KJELDIG in naprave KJELFAST / KJELFASTER — ista epruveta od razklopa do destilacije.

Opcijsko

Druge opcije in potrošni material

SKU	Postavka	Namen	Status
—	Reagenti: žveplovele kislina, NaOH 40 %, borova kislina z indikatorjem, standardna kislina	Potrošni material — naroči se posebej	Opcijsko
—	Kjeldahlove katalizatorske tablete	Razklop — potrošni material, naroči se posebej	Opcijsko


Standardna dobava se potrdi v ponudbi. A24 zahteva KJELFASTER-K900; epruvete za razklop in reagenti se naročijo posebej.

KJELFASTER-A24 STRAN IZDELKA

ORGANSKA ELEMENTNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTNE ANALIZE

ZAHTEVAJTE PONUDBO

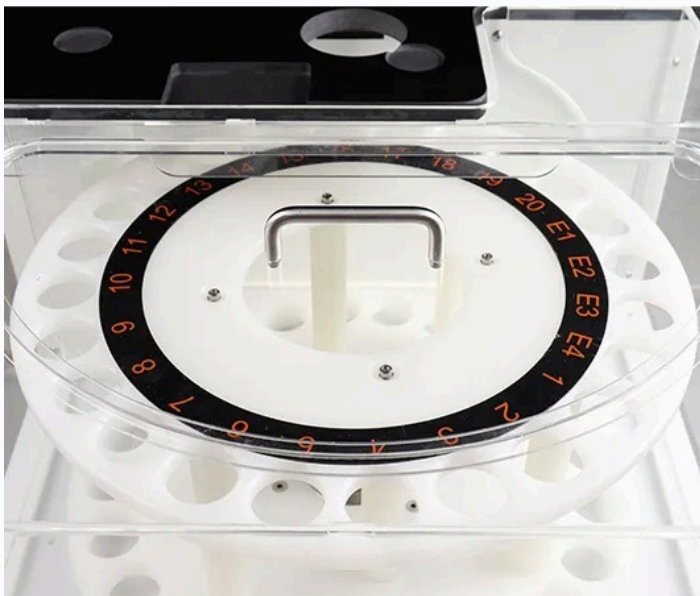

KJELFASTER-A24 Kjeldahlov podajalnik vzorcev

Podatki za naročilo

Postavka	Vrednost
Model	KJELFASTER-A24
SKU	PRO7166
Vrsta instrumenta	Kjeldahlov podajalnik vzorcev
Potrebno	KJELFASTER-K900
Zmogljivost	24 vzorcev na serijo
Posode za reagente	4 × 15 L
Povezava	CAN (do KJELFASTER-K900)
Mere (Š×G×V)	920 × 625 × 908 mm

Kontrolni seznam konfiguracije

Analizator: K900 že nameščen ali naročen skupaj.

Velikost serije: 24 epruvet na serijo.

Delovna miza: prostor in nosilnost za 80 kg ob analizatorju.

Reagenti: posode 4 × 15 L — načrtujte pripravo reagentov.

PRODAJA IN PODPORA

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenija

Pomoč pri izbiri: KJELFASTER-A24 izberete, ko laboratorij s K900 želi serije 24 vzorcev izvajati brez nadzora z minimalnim dolivanjem reagentov. Za ročno polnjenje zadostuje sam K900.

HITRI KONTAKT

 colo.si

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE · PODPORA PRI KONFIGURACIJI KJELDAHLOVEGA SISTEMA

Potrebujete pomoč pri sestavi Kjeldahlovega sistema?

Sporočite nam vrste vzorcev in dnevno število vzorcev. COLO.Science bo sestavil sistem z KJELFASTER-A24 (digestor, pralnik, analizator), validiral metodo na vašem vzorcu in poslal ponudbo.

Web: colo.si

Vprašajte nas:

Cena in aktualni popust, dobavni rok, konfiguracija sistema za vaše vzorce, namestitve in usposabljanje, validacija metode, epruvete za razklop, reagenti in rezervni deli — pišite na sales@colo.si ali nas pokličite.

KJELFASTER-A24 STRAN IZDELKA

ORGANSKA ELEMENTNA ANALIZA — PREGLED

KATALOG ORGANSKE ELEMENTNE ANALIZE

ZAHTEVAJTE PONUDBO