

PRO6136 · pH kompozitna elektroda bez dopunjavanja

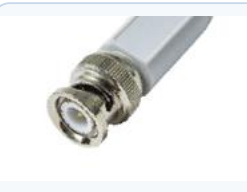
Telo od polikarbonata · Ag/AgCl referentni sistem · POM dijafragma · ne dopunjava se · BNC

PH 0–14 5–60 °C BEZ DOPUNJAVANJA POM DIJAFRAGMA $\Phi 12 \times 120$ MM BNC (Q9)



PRO6136 je najjednostavnija elektroda u ponudi: zatvorena pH elektroda koja se ne dopunjava, sa telom od polikarbonata, za rutinske provere razblaženih vodenih uzoraka i vode za piće.

Kako je građena

 PH SENZOR Sferni vrh Staklena membrana opšte namene, za uobičajene rastvore.	 TELO Polikarbonat Nelomljivo telo za svakodnevni rad. Nije za organske rastvarače.	 DIJAFRAGMA POM Dijafragma otporna na rastvarače, za elektrode koje se ne dopunjavaju.	 KONEKTOR BNC (Q9) Za pH instrumente sa BNC ulazom za elektrodu.
OPSEG pH 0 – 14	TEMPERATURA 5 – 60 °C	ODRŽAVANJE Bez dopunjavanja	NAJBOLJA ZA Rutinske provere

Zašto je izabrati

Proveren referentni sistem: Ag/AgCl referentni sistem za rutinska laboratorijska merenja.

Nema šta da se dopunjava: zatvoren referentni sistem — isperite, čuvajte vlažnu, merite.

POM dijafragma: dijafragma otporna na rastvarače, za elektrode koje se ne dopunjavaju.

PRO6136 · pH kompozitna elektroda bez dopunjavanja

Tehnički parametri

Parametar	Specifikacija
Model / šifra za poručivanje	PRO6136
Tip elektrode	pH kompozitna (kombinovana) elektroda
Merni opseg	pH 0 – 14
Radna temperatura	5 – 60 °C
pH senzor	Polusferna staklena membrana
Materijal tela	Polikarbonat
Referentni sistem	Ag/AgCl
Dijafragma	POM
Rastvor za dopunu	Ne dopunjava se — bez dolivanja elektrolita
Temperaturni senzor	Nema
Dimenzije	Φ12 × 120 mm
Konektor	BNC (Q9)

Kompenzacija temperature: elektroda nema ugrađen temperaturni senzor; koristi se posebna temperaturna sonda instrumenta ili ručna kompenzacija.



BNC (Q9) konektor. Priključuje se direktno na pH instrumente sa BNC ulazom za elektrodu.

Preporučeni uzorci

Oblast	Vrste uzoraka • preporučeno
Vodeni rastvori	Razblažene kiseline i baze
Životna sredina	Voda iz slavine i voda za piće (oko 100 µS/cm)
Takođe primenljiva ○	Rastvori za fiksiranje i galvanizaciju • jogurt, sir, maslac • džem • jestiva ulja • soja sos, sirće • boje, bojila, mastilo • boje na vodenoj bazi, lakovi, premazi, lateks • sredstva za apreturu • gel, sapun, šampon, farba za kosu, losion • procedne vode iz zemljišta • mulj <i>Vek trajanja može biti kraći.</i>

Podaci za poručivanje

Šifra: PRO6136

Konektor: BNC (Q9) — pre porudžbine proverite ulaz na instrumentu.

Potrošni materijal: rastvor za dopunu nije potreban.

Drugu elektrodu izaberite kada je

Čista voda ili voda niske provodljivosti: elektroda za nisku provodljivost ili za ultračistu vodu.

Organski rastvarači: elektroda sa staklenim telom.

Iznad 60 °C: elektroda predviđena za višu temperaturu.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad
Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad

KONTAKT

 colo.si/sr

 sales@colo.si

 +381 64 659 14 21

COLO.SCIENCE • PODRŠKA PRI IZBORU ELEKTRODE

Niste sigurni da je ovo prava elektroda za vaš uzorak?

Pošaljite nam model instrumenta, vrstu uzorka, opseg pH i temperaturu — potvrdićemo elektrodu ili predložiti bolji izbor iz kataloga.

Tehničke vrednosti date su radi izbora proizvoda. Za isporuku je obavezujuća konfiguracija potvrđena u ponudi COLO.Science.

PRO6136 — STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU