

PRO6137 · Ubodna pH kompozitna elektroda sa sečivom, bez dopunjavanja

Sečivo od nerđajućeg čelika · Ag/AgCl referentni sistem · dijafragma od tkanine · ne dopunjava se · BNC

PH 0–14

5–60 °C

BEZ DOPUNJAVANJA

DIJAFRAGMA OD TKANINE

Φ12×36+Φ20×132 MM

BNC (Q9)



PRO6137 je ubodna pH elektroda za meso, ribu, voće, povrće, paste i zemljište, sa sečivom od nerđajućeg čelika 316 i zatvorenim referentnim sistemom koji se ne dopunjava.


Kako je građena



PH SENZOR

Ubodni vrh

Probija polučvrste proizvode — sir, meso, voće, zemljište.

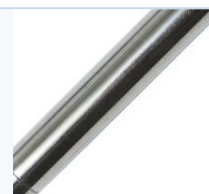

TELO

POM + nerđajući čelik 316

Sečivo od nerđajućeg čelika za probijanje uzorka.



DIJAFRAGMA

Tkanina, jednostruka

Dobra propustljivost, stabilan potencijal, povoljna cena.



KONEKTOR

BNC (Q9)

Za pH instrumente sa BNC ulazom za elektrode.

OPSEG

pH 0 – 14

TEMPERATURA

5 – 60 °C

ODRŽAVANJE

Bez dopunjavanja

NAJBOLJA ZA

Meso, ribu, voće, zemljište

Zašto je izabrati

Proveren referentni sistem: Ag/AgCl referentni sistem za rutinska laboratorijska merenja.

Nema šta da se dopunjava: zatvoren referentni sistem — isperite, čuvajte vlažnu, merite.

Dijafragma od tkanine: dobra propustljivost, stabilan potencijal, povoljna cena.

PRO6137 · Ubodna pH kompozitna elektroda sa sečivom, bez dopunjavanja

PRO6137 — STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU

Tehnički parametri

Parametar	Specifikacija
Model / šifra za poručivanje	PRO6137
Tip elektrode	pH kompozitna (kombinovana) elektroda
Merni opseg	pH 0 – 14
Radna temperatura	5 – 60 °C
pH senzor	Staklena membrana u obliku koplja
Materijal tela	POM + nerđajući čelik 316
Referentni sistem	Ag/AgCl
Dijafagma	Tkanina, jednostruka
Rastvor za dopunu	Ne dopunjava se — bez dolivanja elektrolita
Temperaturni senzor	Nema
Dimenzije	Φ12 × 36 + Φ20 × 132 mm
Konektor	BNC (Q9)

Kompenzacija temperature: elektroda nema ugrađen temperaturni senzor; koristi se posebna temperaturna sonda instrumenta ili ručna kompenzacija.



BNC (Q9) konektor. Priključuje se direktno na pH instrumente sa BNC ulazom za elektrodu.

Preporučeni uzorci

Oblast	Vrste uzoraka • preporučeno
Hrana	Meso, riba • voće, povrće • paste
Životna sredina	Zemljište

Podaci za poručivanje

Šifra: PRO6137

Konektor: BNC (Q9) — pre porudžbine proverite ulaz na instrumentu.

Potrošni materijal: rastvor za dopunu nije potreban.

Drugu elektrodu izaberite kada je

Čista voda ili voda niske provodljivosti: elektroda za nisku provodljivost ili za ultračistu vodu.

Iznad 60 °C: elektroda predviđena za višu temperaturu.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad
Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad

KONTAKT

 colo.si/sr

 sales@colo.si

 +381 64 659 14 21

COLO.SCIENCE • PODRŠKA PRI IZBORU ELEKTRODE

Niste sigurni da je ovo prava elektroda za vaš uzorak?

Pošaljite nam model instrumenta, vrstu uzorka, opseg pH i temperaturu — potvrdićemo elektrodu ili predložiti bolji izbor iz kataloga.

Tehničke vrednosti date su radi izbora proizvoda. Za isporuku je obavezujuća konfiguracija potvrđena u ponudi COLO.Science.

PRO6137 — STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU